

ViMech



Válvulas mecánicas: identificación fluoroscópica y diseño para valve-in- valve

Manual de usuario y catálogo completo



https://hcuvicicor.github.io/ViMech_app/

Versión de datos 2026-10-06 · 8 de octubre de 2026

9 marcas · 36 modelos · 5 idiomas

ICICOR — Instituto de Ciencias del Corazón · Hospital Clínico Universitario de Valladolid

© 2026 ICICOR · CC BY-NC-ND 4.0. Imágenes, nombres y marcas de terceros excluidos de la licencia.

1. Introducción

2. Guía de funciones

3. Guía de planificación ViMech

4. Catálogo de válvulas

5. Dispositivos TAVI en la simulación

6. Fuentes, licencia, derechos y créditos

1. Bicarbon™ — Aórtica Overline (supraanular), Aórtica Slimline, Aórtica Fitline, Mitral Fitline
2. CarboMedics — Aórtica Estándar, Aórtica Reducida, Aórtica Top Hat (totalmente supraanular), Aórtica Orbis, Mitral Estándar, Mitral Optiform, Mitral Orbis
3. Edwards Duromedics — Aórtica Estándar, Mitral Estándar
4. HP-Biplus — Aórtica Estándar, HP-Biplus C
5. Jyros — Aórtica Estándar
6. Medtronic Open Pivot™ (ATS) — Open Pivot™ Aórtica Estándar (intraanular), Open Pivot™ AP / AP360™ Aórtica (supraanular), Open Pivot™ Mitral Estándar, Open Pivot™ AP360™ Mitral (supraanular)
7. Meril Miltonia™ — Miltonia™ Aórtica, Miltonia™ Aórtica Advanced Performance (AP), Miltonia™ Mitral
8. On-X® — Anillo de sutura Conform-X®, Anillo de sutura Anatomic, Anillo de sutura estándar, On-X® Mitral (anillo estándar), On-X® Mitral Conform-X®
9. SJM — SJM Regent™ — Manguito estándar, SJM Regent™ — FlexCuff, SJM Masters™ — Serie HP, SJM Masters™ — Manguito de poliéster, SJM Masters™ — Manguito de PTFE, SJM Masters™ — Manguito de poliéster (mitral), SJM Masters™ — Serie HP (mitral), SJM Masters™ — Manguito de PTFE (mitral)

1 Introducción

ViMech es una aplicación web gratuita, desarrollada por el ICICOR (Instituto de Ciencias del Corazón, Hospital Clínico Universitario de Valladolid), que reúne en un único lugar la identificación fluoroscópica, el diseño, las dimensiones y el tamaño de TAVI de las válvulas cardíacas mecánicas bidisco, como referencia para los procedimientos *valve-in-mechanical* (TAVI dentro de una prótesis mecánica).

Este manual contiene la guía completa de uso de cada función, el catálogo íntegro de las 9 marcas y 36 modelos con sus fotografías, dimensiones, tablas de TAVI y fuentes, y la información de licencia, derechos y créditos.

Finalidad prevista: ViMech es una referencia educativa que recopila las dimensiones publicadas de las válvulas cardíacas mecánicas y sus rasgos de identificación fluoroscópica. No procesa datos de pacientes, no toma decisiones diagnósticas ni terapéuticas y no es un producto sanitario.

Esta herramienta tiene fines informativos y educativos. No sustituye a las instrucciones de uso del fabricante, a la valoración por imagen ni al juicio clínico. Verifique siempre las dimensiones con la documentación oficial antes de cualquier procedimiento.

Las sugerencias de tamaño TAVI son orientativas y deben confirmarse por el Heart Team. Los creadores no se responsabilizan de errores u omisiones.

No afiliación: aplicación independiente, sin afiliación, respaldo ni patrocinio de ninguno de los fabricantes mencionados.

Acceso, instalación y uso sin conexión


- Dirección: https://hcuvicicor.github.io/ViMech_app/ (también mediante el código QR de la portada).
- Funciona en móvil, tableta y ordenador, en cualquier navegador actual. No requiere registro ni recoge datos de pacientes.
- Se puede instalar como app: en Android/Chrome, menú : → «Instalar aplicación»; en iPhone/Safari, Compartir → «Añadir a pantalla de inicio».
- Una vez abierta, sigue funcionando sin conexión y se actualiza sola cuando hay una versión nueva.
- Idiomas: español, inglés, portugués, francés e italiano (Más → Idioma). Temas: oscuro (por defecto), gris, aurora, claro y automático (Más → Tema).

2 Guía de funciones

Pantalla principal y catálogo

Al abrir la app se ve el catálogo de marcas. Cada tarjeta indica el fabricante, las posiciones disponibles (aórtica/mitral), el rango de tallas y el porcentaje de valores procedentes de fuente oficial.

- ⓘ muestra la descripción de la app.
- ☰ **Cómo usarla** despliega los 5 pasos del flujo de trabajo, el enlace a la guía de planificación y el caso de ejemplo guiado.
- 🔍 abre el buscador por marca, modelo o código de catálogo.
- Los filtros **Todas / Aórtica / Mitral** limitan el catálogo a una posición.
- Barra inferior: Válvulas, Fluoro, Estimar ViV y Más (menú).

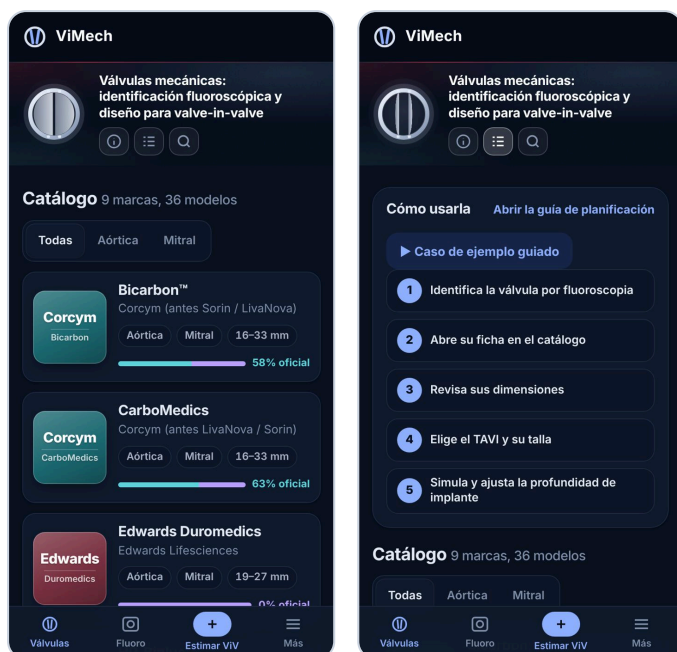

Catálogo

Cómo usarla

Ficha de la válvula

Cada marca tiene una ficha con un selector de posición (aórtica/mitral) y de modelo. La ficha reúne:

- Imágenes y diseño (se amplían con un toque; se puede hacer zoom con dos dedos).
- **Elige una talla:** al tocar una talla aparecen sus medidas clave (DI, TAD, GOA, EOA, alturas), el esquema de dimensiones a escala y las tallas de TAVI sugeridas para cada dispositivo. Los valores en ámbar con ⚠ indican «Caution».
- Botones **Simular ViV** y **Comparar**.
- Tabla completa de especificaciones técnicas; tocar una fila abre esa talla.
- Identificación fluoroscópica, posicionamiento y despliegue, y fuentes de cada dato con su código de color: 🟢 fuente oficial, 🟠 no oficial (literatura, distribuidores), 🟡 datos propios del hospital.
- **Contacto del fabricante** (teléfono, correo, dirección y web públicos) y **Comunicar un error** (abre un correo con los datos de la ficha).



Cabecera de la ficha



Talla seleccionada



Esquema de dimensiones

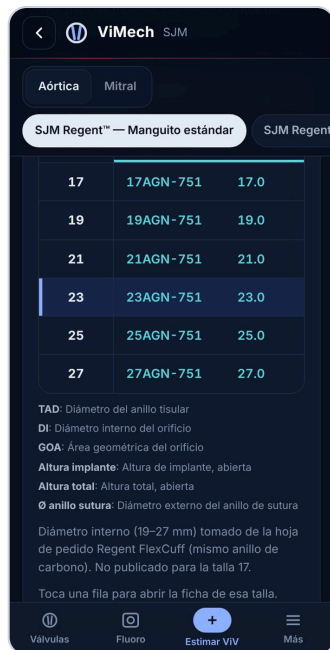


Tabla de especificaciones



Contacto del fabricante

Fluoroscopia e identificación

La pestaña **Fluoro** reúne el atlas cinefluoroscópico de todas las válvulas. Desde ahí, desde la guía de planificación o desde el menú se abre el asistente **Identificar por fluoroscopia**:

- Se indica la posición y, si se conoce, la talla etiquetada.
- Se responde a lo que se ve en la imagen: si el anillo es visible, si los discos son curvos, si el pivote es alto, si hay un segundo anillo más radiopaco y si los discos son muy densos.
- Se apartan los modelos cuyas características documentadas contradicen una respuesta; los modelos sin descripción documentada nunca se descartan. Las candidatas aparecen agrupadas por marca con su descripción, sus imágenes y el acceso a cada ficha.

Ayuda orientativa construida solo con las descripciones fluoroscópicas de la app (artículo ViMech). Confirma siempre con las imágenes, la historia del paciente y la documentación del fabricante.



Atlas de fluoroscopia



Preguntas



Candidatas

Estimar ViV

El botón central de la barra inferior abre la estimación de tamaño, con dos modos:

- **Por modelo de válvula:** se elige posición, marca, modelo y talla y se muestran las tallas de TAVI de la tabla, con acceso a la ficha completa.
- **Por diámetro interno:** se introduce un DI medido y una tolerancia, y se listan las válvulas cuyo DI publicado encaja, ordenadas por cercanía y con la más próxima destacada.



Estimación por modelo

Simulación ViV

Desde la ficha de cualquier talla, **Simular ViV** superpone a escala la válvula transcáteter (TAVI) dentro de la prótesis mecánica ya implantada. Al abrirse, la TAVI llega plegada desde la aorta y se expande dentro del anillo (botón **Repetir implante**).

- **Selección de la TAVI:** se propone automáticamente la más compatible (Más compatible = entre los dispositivos recomendados para esta talla en la tabla de tamaños (excluyendo «Caution»), el de menor diámetro nominal que no sea inferior al DI mecánico.); las demás opciones de la tabla aparecen como botones y se puede elegir cualquier otro dispositivo y talla.
- **Profundidad de implante:** deslizador que baja o sube la TAVI respecto a la entrada del anillo.
- **Vistas:** Lateral (corte a escala con cotas), Superior (diámetro dentro del anillo frente al nominal), 3D (se gira arrastrando) y Fluoro (proyección radiológica simulada, con inclinación, rotación e indicador de vista coplanar).
- **Capas:** cuerpo mecánico, anillo de sutura, armazón, valvas y faldón de la TAVI, anatomía del paciente, cotas y números; cada toque pasa de visible a atenuada y a oculta.
- **Resultados:** DI mecánico, diámetro nominal, sobredimensión frente al DI, diámetro dentro del anillo, constricción, altura y porción por encima del anillo; avisos si la combinación es «Caution» o si la TAVI es menor que el DI.
- **Medidas del paciente por TAC** (opcional): altura de cada coronaria, $\emptyset$ de senos, $\emptyset$ y altura de la unión sinotubular. Se dibuja la raíz aórtica, el armazón queda limitado por ella y se calcula la distancia TAVI–coronaria a la altura de cada ostium.
- **Comparativa de candidatos:** tabla con sobredimensión y constricción de cada opción; tocar una fila la simula.
- **Compartir esta simulación:** genera un enlace que conserva dispositivo, talla, profundidad, vista y medidas del TAC.
- **Informe de planificación (imprimir / PDF):** hoja A4 con la válvula, la TAVI, los resultados, la comparativa, los dibujos y las fuentes, con una línea en blanco para anotar el caso a mano.

Simulación geométrica orientativa a partir de dimensiones nominales. No modela los discos/valvas ni los pivotes de la válvula mecánica, el tejido, el calcio, el retroceso del stent ni la expansión real, y no sustituye a la planificación por TC ni a las IFU de los fabricantes. El estrechamiento en los bordes del anillo se dibuja como una transición progresiva de longitud esquemática.



Selección de la TAVI



Vista lateral



Vista superior



Vista 3D



Fluoroscopia simulada



Capas




Medidas del TAC



Raíz y coronarias




Resultados

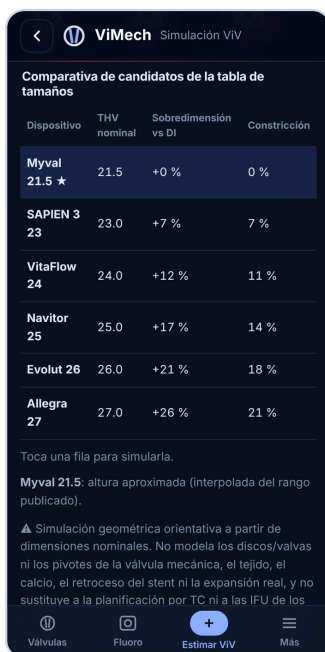

Comparativa

Comparar válvulas

Pone dos modelos o tallas lado a lado (desde «⇌ Comparar» en la ficha o desde el menú): todas sus dimensiones con la diferencia, las tallas de TAVI de la tabla y las imágenes de diseño y fluoroscopia. El botón ⇌ intercambia ambos lados.

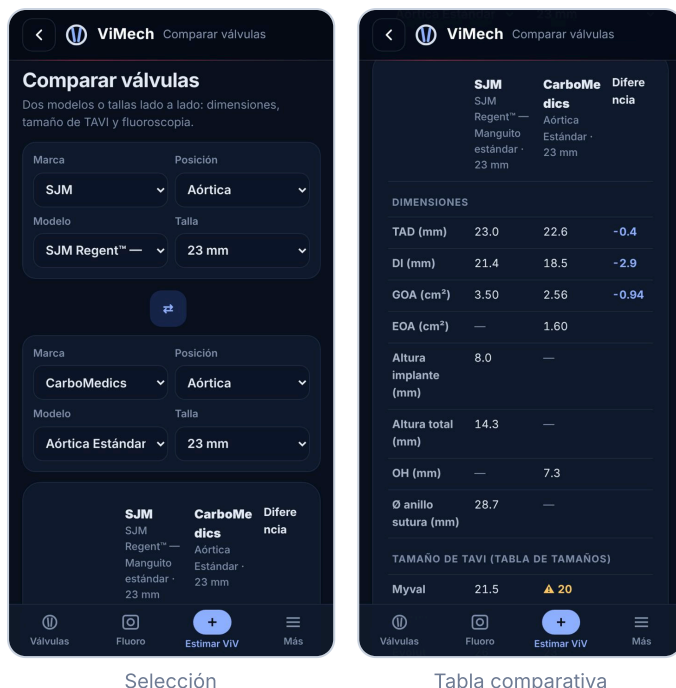

Selección

Tabla comparativa

Guía de planificación


Seis puntos a evaluar antes de un procedimiento valve-in-mechanical, del artículo del equipo ViMech, con figuras y referencias (se reproduce íntegra en el capítulo siguiente).



Guía de planificación

Menú, caso de ejemplo y compartir

- **Más** abre el menú: idioma, tema, identificar por fluoroscopia, comparar válvulas, caso de ejemplo guiado, compartir ViMech (QR), guía de planificación, fuentes de datos, acerca de, aviso legal, licencia y créditos, contacto, política de privacidad y este manual.
- **Caso de ejemplo guiado**: recorre solo, en 9 pasos de unos 7 s, todo el flujo con la SJM Regent 23 mm; barra inferior con anterior, pausa, siguiente y salir. Con la dirección `.../ViMech_app/?demo=loop` se repite en bucle (útil para pantallas de congreso).
- **Compartir ViMech (QR)**: código QR y enlace para abrir la app en otro dispositivo.

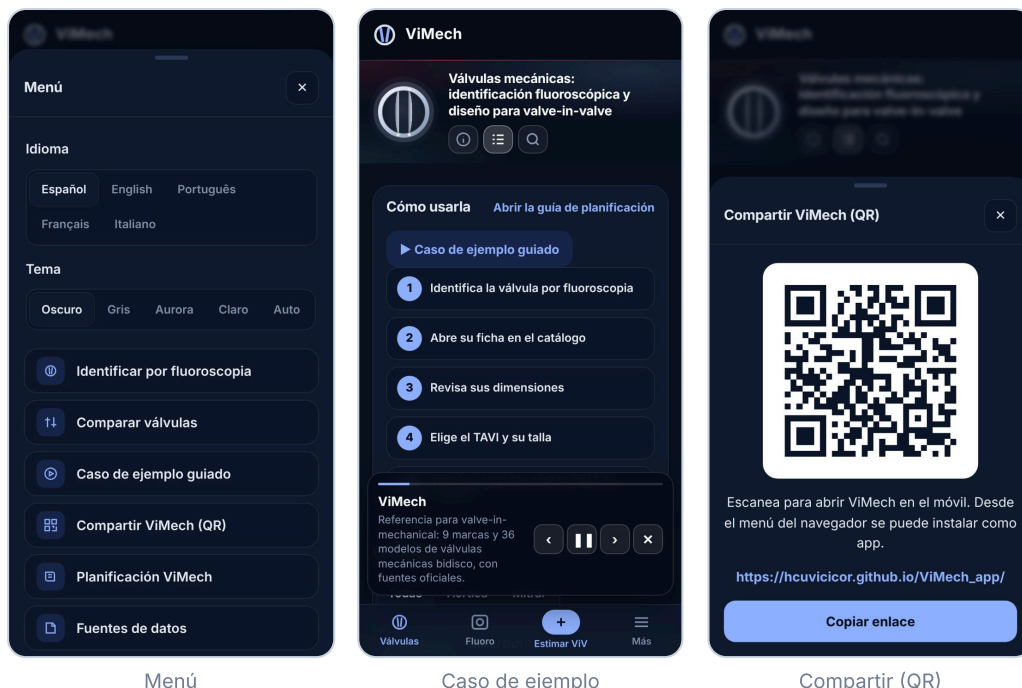

Menú

Caso de ejemplo

Compartir (QR)

Abreviaturas

Talla	Talla (mm)
TAD	Diámetro del anillo tisular
Ø externo	Diámetro externo
DI	Diámetro interno del orificio
GOA	Área geométrica del orificio
Área orificio	Área interna del orificio
EOA	Área efectiva in vivo (fabricante)
Altura implante	Altura de implante, abierta
Altura total	Altura total, abierta
OH	OH tal como lo indica el fabricante
Perfil total	Altura total del perfil
Perfil entrada	Altura del perfil de entrada
Perfil salida	Altura del perfil de salida
Ø anillo sutura	Diámetro externo del anillo de sutura
Perfil h cerrada	Altura de perfil, cerrada
Perfil H abierta	Altura de perfil, abierta
THV / TAVI	Válvula transcáteter
ViV	Valve-in-valve
IFU	Instrucciones de uso del fabricante


3 Guía de planificación ViMech

Seis puntos que hay que evaluar antes de un TAVI dentro de una válvula mecánica, según el artículo del equipo ViMech.

1. Identificación fluoroscópica

La fractura de los discos de una válvula mecánica es factible con balones de angioplastia comerciales, por lo que con la evidencia actual la técnica se limita a válvulas mecánicas bidisco.

Usa los rasgos fluoroscópicos de cada válvula para identificarla en la mesa.

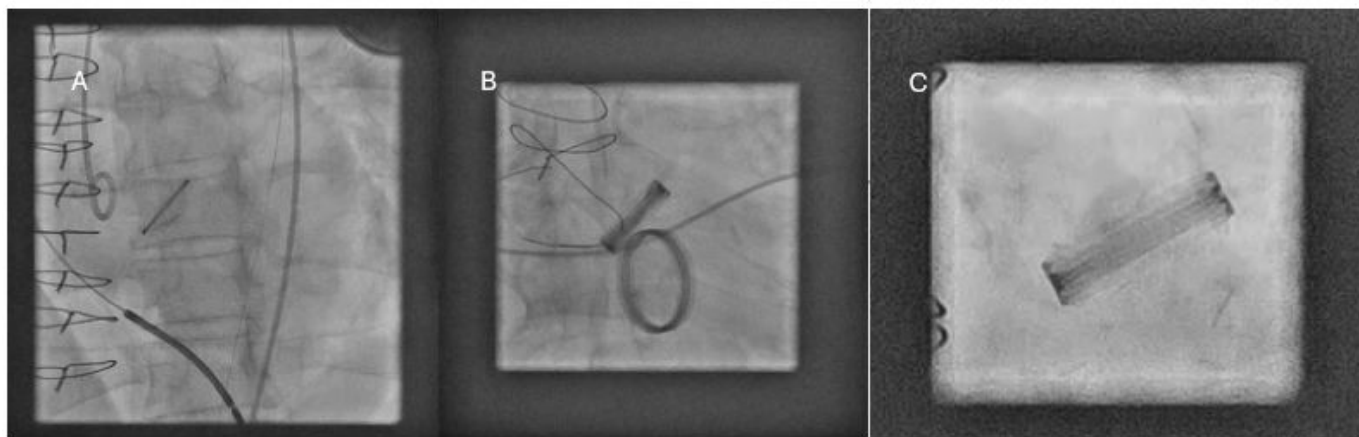


Identificación fluoroscópica: A St Jude, B CarboMedics, C ATS.

2. Diseño y diámetro interno real

La talla nominal de una válvula bidisco se corresponde, en líneas generales, con el anillo tisular al que va destinada. Las medidas que importan para elegir el TAVI son el diámetro del anillo tisular, el área geométrica del orificio y el diámetro interno.

El diámetro interno real (DI) no es el diámetro del anillo tisular (TAD). El TAD es el área de flujo más pequeña dentro del anillo nativo, medida en quirófano con medidores cilíndricos; el DI es el diámetro mínimo dentro de la prótesis por el que pasa la sangre.

Elige el THV según el DI real y el área geométrica del orificio. Descarta pannus con ecocardiografía transesofágica, porque puede reducir aún más el DI real.

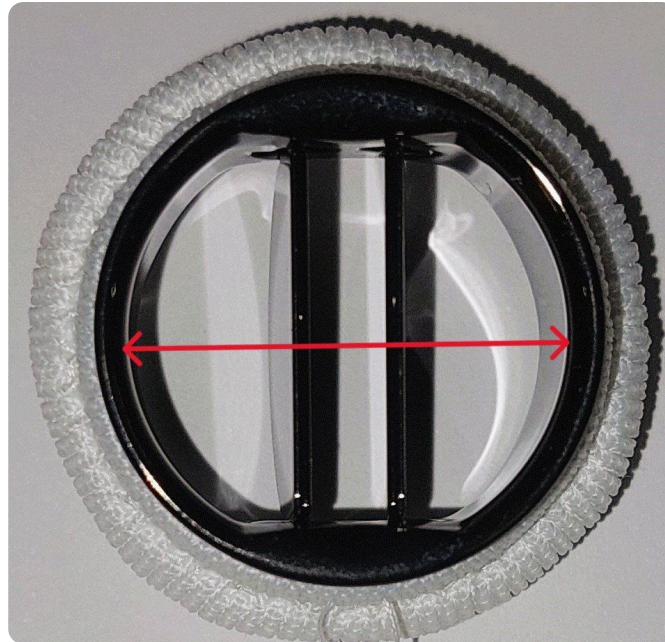

Diámetro interno de una válvula mecánica.

3. Tamaño y diseño del THV

Conoce el diseño del THV (intraanular o supraanular) para posicionarlo correctamente dentro de la prótesis.

En general se prefieren las válvulas balón-expandibles por su fuerza radial y por su capacidad para fracturar o atrapar un disco que no se haya desprendido con la predilatación.


Cada ficha muestra el tamaño sugerido de cada THV comercial para cada talla de prótesis.

4. Cruce de guía y predilatación

En banco se comprobó que la guía debe cruzar entre los dos discos (orificio B), lo que facilita la fractura durante la predilatación.

La predilatación con balón fue la forma más eficaz de desprender los discos, más que el lazo. Usa un balón periférico dimensionado según TC y fluoroscopia.

Uno o ambos discos pueden fracturarse y embolizar. Evita el marcapasos rápido durante la predilatación para que los discos no pasen al ventrículo izquierdo.

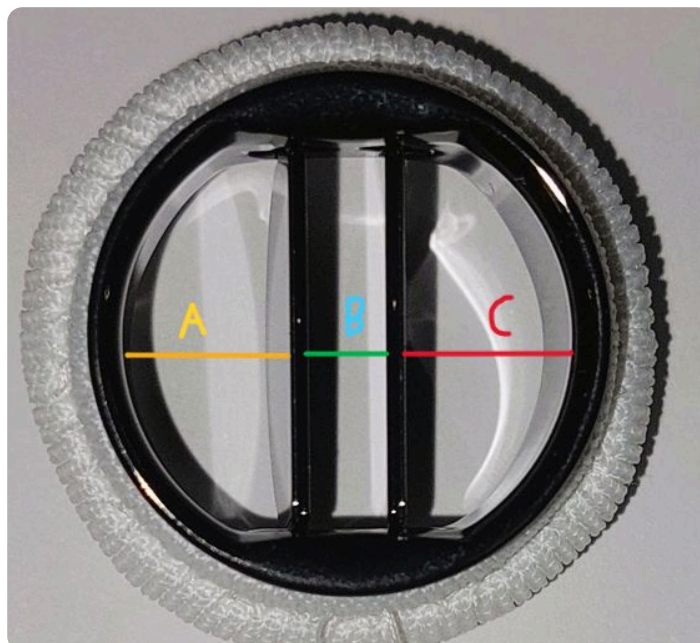


Cruza la guía por el orificio B para facilitar la fractura durante la predilatación.

5. Posición de implante

El anillo de la prótesis es la referencia para implantar el THV. Orienta la válvula en una proyección lateral en fluoroscopia.

Válvulas balón-expandibles: altura ideal 80:20 (aórtico:ventricular). Válvulas autoexpandibles: se acepta una profundidad de hasta 3 mm.

Un implante más alto puede provocar la embolización de la válvula.

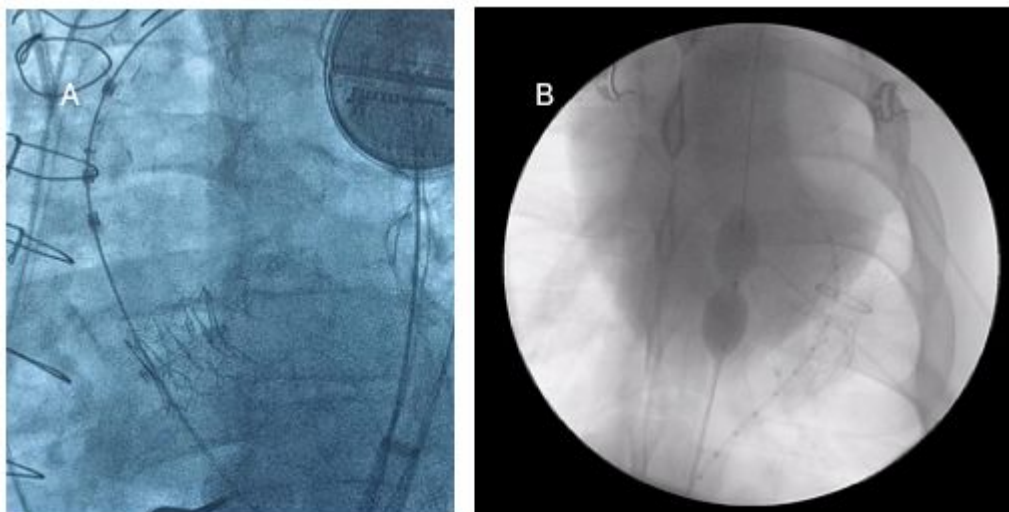


Profundidad de implante del TAVI en válvula mecánica: A BEV en SJM, B SEV en SJM. Vídeo 1: implante de Myval en válvula St Jude.

6. Anticipar complicaciones

Válvula mecánica pequeña: valora el TAVI con precaución, porque los THV actuales pueden causar desajuste paciente-prótesis e infraexpansión por el diámetro interno reducido. El equipo implanta algo más alto y abocina (flare) la BEV.

Fragmentos de disco: se recomienda protección cerebral con dispositivo Flower o Sentinel. Deja el extremo distal del Flower dentro del introductor de 22F para evitar la embolización distal. En la experiencia del equipo, los fragmentos que llegan a la circulación periférica se han endotelizado sin problemas.

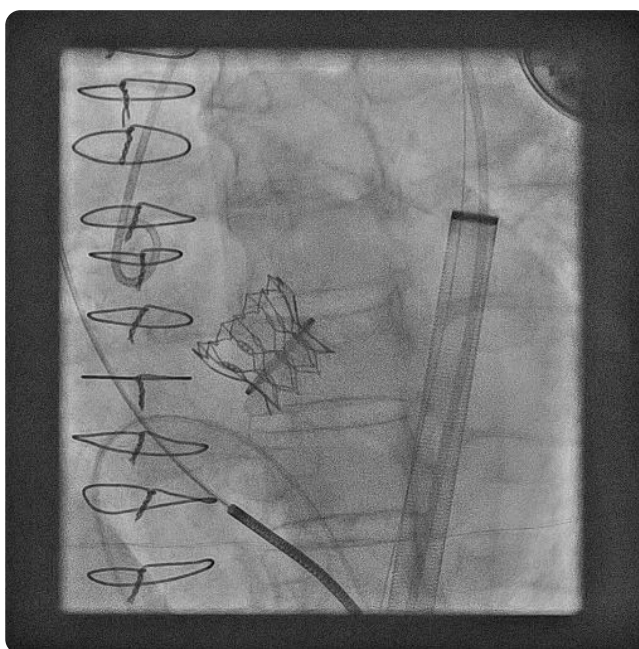

Abocinamiento (flare) de la BEV en válvulas mecánicas pequeñas para evitar el desajuste paciente-prótesis.

Referencias clave

1. Amat-Santos IJ, Real C, Galán-Arriola C, et al. Transcatheter aortic valve-in-mechanical valve replacement: a first-in-human study. *Eur Heart J*. 2026. doi:10.1093/eurheartj/ehag019
2. Jankowska PA, Butter C, Kühnel RU. Serial in vitro investigation of the fracture properties of mechanical heart valves. *JACC Cardiovasc Interv*. 2026;19(4):505-513. doi:10.1016/j.jcin.2025.11.040
3. Kalçık M, Güner A, Yesin M, et al. Identification of mechanical prosthetic heart valves based on distinctive cinefluoroscopic and echocardiographic markers. *Int J Artif Organs*. 2019;42(11):603-610. doi:10.1177/0391398819860845
4. Chambers JB, Oo L, Narracott A, et al. Nominal size in six bileaflet mechanical aortic valves: a comparison of orifice size and biologic equivalence. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2003;125(6):1388-93. doi:10.1016/s0022-5223(03)00039-4


Contenido del artículo del equipo ViMech (manuscrito en preparación).

4 Catálogo de válvulas

Para cada marca y modelo: fotografías, identificación fluoroscópica, posicionamiento, tabla completa de dimensiones, tabla de tallas de TAVI y fuentes. Colores de procedencia: ■ Fuente oficial · ■ Datos no oficiales (literatura, distribuidores) · ■ Datos propios del hospital.

Bicarbon™ Corcym (antes Sorin / LivaNova)

Aórtica Overline (supraanular) Aórtica

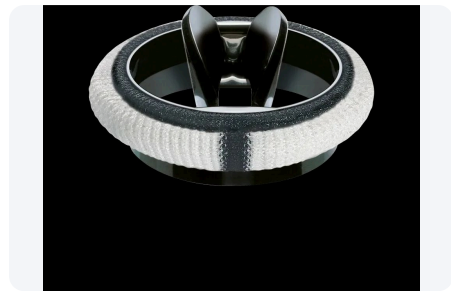

Sorin Bicarbon aórtica — Foto · © Corcym



Sorin Bicarbon familia — Foto · © Corcym



Sorin Bicarbon Overline aórtica — Foto · © Corcym



Sorin Bicarbon 1990 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo y los discos son radiopacos.
- Vista frontal: su característica distintiva es un perfil curvo (que separa el orificio valvular en tres secciones equivalentes).
- Vista lateral: apariencia nebulosa patognomónica de los discos curvos.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	EOA (cm ²)	OH (mm)
16	ICV0870	15.2	15.2	1.76	0.97	6.0
18	ICV0871	17.2	17.2	2.27	1.54	6.4
20	ICV0872	19.2	19.2	2.83	2.07	6.8
22	ICV0873	21.3	21.3	3.45	2.39	7.2
24	ICV0874	23.3	23.3	4.14	3.06	7.6

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
16	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
18	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
20	20/21.5	20	23	23	23	21
22	21.5	23	26	23	25	24
24	23/24.5	23	26	27	25/27	24/27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Corcym — Bicarbon™ Family brochure CC-MK-00002 A — <https://www.corcym.com/devices/aortic>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Aórtica Slimline Aórtica

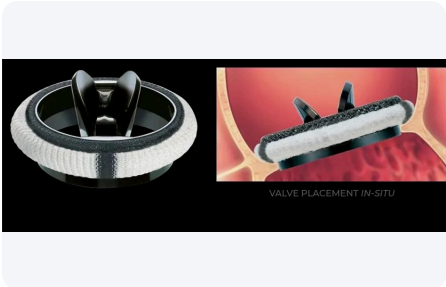

Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Posición in situ · © Corcym



Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Foto · © Corcym



Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Posición in situ · © Corcym



Sorin Bicarbon 1990 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo y los discos son radiopacos.
- Vista frontal: su característica distintiva es un perfil curvo (que separa el orificio valvular en tres secciones equivalentes).
- Vista lateral: apariencia nebulosa patognomónica de los discos curvos.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	EOA (cm²)	OH (mm)
17	ICV0934	17.2	15.2	1.76	1.01	6.0
19	ICV0935	19.2	17.2	2.27	1.50	6.4
21	ICV0936	21.3	19.2	2.83	1.90	6.8

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	EOA (cm ²)	OH (mm)
23	ICV0937	23.4	21.3	3.45	2.39	7.2
25	ICV0938	25.6	23.3	4.14	3.06	7.6
27	ICV0939	28.0	25.6	5.00	3.45	8.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
17	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	23	25	24
25	23/24.5	23	26	27	25/27	24/27
27	26	26	29	31	29	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Corcym — Bicarbon™ Family brochure CC-MK-00002 A — <https://www.corcym.com/devices/aortic>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


Aórtica Fitline Aórtica

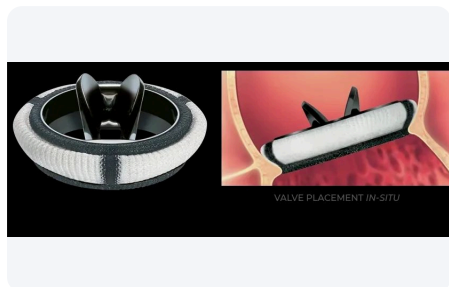

Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Posición in situ · © Corcym



Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Foto · © Corcym

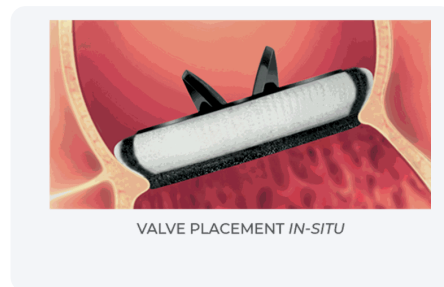

Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Posición in situ · © Corcym



Sorin Bicarbon 1990 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo y los discos son radiopacos.
- Vista frontal: su característica distintiva es un perfil curvo (que separa el orificio valvular en tres secciones equivalentes).
- Vista lateral: apariencia nebulosa patognomónica de los discos curvos.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	EOA (cm²)	OH (mm)
19	ICV0917	19.0	15.2	1.76	0.97	6.0
21	ICV0918	21.2	17.2	2.27	1.54	6.4
23	ICV0919	23.4	19.2	2.83	2.07	6.8
25	ICV0920	25.6	21.3	3.45	2.39	7.2
27	ICV0921	27.8	23.3	4.14	3.06	7.6
29	ICV0922	30.0	25.6	5.00	3.45	8.0
31	ICV0923	32.0	25.6	5.00	3.45	8.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
23	20/21.5	20	23	23	23	21
25	21.5	23	26	23	25	24
27	23/24.5	23	26	27	25/27	24/27
29	26	26	29	31	29	27
31	26	26	29	31	29	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Corcym — Bicarbon™ Family brochure CC-MK-00002 A — <https://www.corcym.com/devices/aortic>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Mitral Fitline Mitral

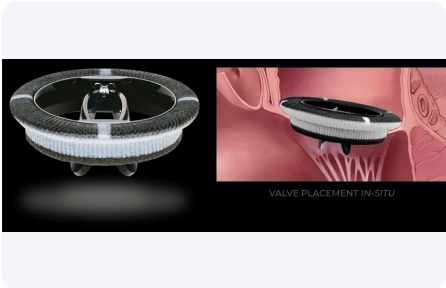


Sorin Bicarbon Fitline mitral — Posición in situ · © Corcym



Sorin Bicarbon Fitline mitral — Foto · © Corcym



Sorin Bicarbon Fitline mitral — Posición in situ · © Corcym

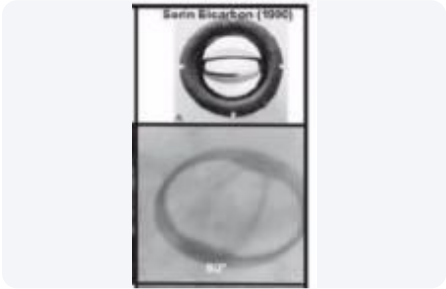

Sorin Bicarbon 1990 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo y los discos son radiopacos.
- Vista frontal: su característica distintiva es un perfil curvo (que separa el orificio valvular en tres secciones equivalentes).
- Vista lateral: apariencia nebulosa patognomónica de los discos curvos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	OH (mm)
19	ICV0924	19.0	15.2	1.76	6.0
21	ICV0925	21.2	17.2	2.27	6.4
23	ICV0926	23.4	19.2	2.83	6.8
25	ICV0927	25.6	21.3	3.45	7.2
27	ICV0928	27.8	23.3	4.14	7.6
29	ICV0929	30.0	25.6	5.00	8.0
31	ICV0930	32.0	25.6	5.00	8.0
33	ICV0931	34.0	25.6	5.00	8.0

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

- Corcym — Bicarbon™ Family brochure CC-MK-00002 A — <https://www.corcym.com/devices/aortic>

Contacto del fabricante: Corcym S.r.l. · communication@corcym.com · Via Giovanni Spadolini 7, Centro Leoni, 20141 Milano, Italy · <https://www.corcym.com/contact-us>

Aórtica Estándar

Aórtica




CarboMedics aórtica (1996) — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)




CarboMedics aórtica (1996) — Foto oblicua · Smithsonian NMAH (CC0)



CarboMedics Standard aórtica — Foto · © Corcym

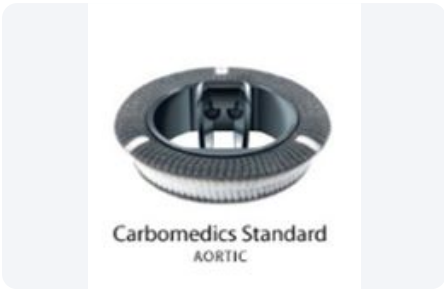

CarboMedics Standard aórtica — Foto de catálogo · © Corcym

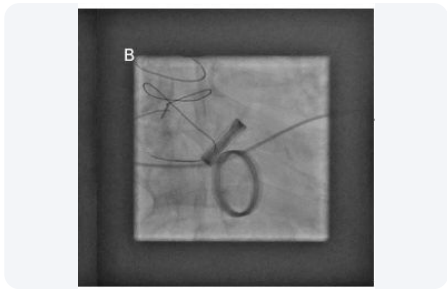

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)



CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	EOA (cm²)	OH (mm)
19	R5-019	18.8	14.7	1.59	1.00	6.2
21	R5-021	20.8	16.7	2.07	1.50	6.6
23	R5-023	22.6	18.5	2.56	1.60	7.3
25	R5-025	25.0	20.5	3.16	2.00	7.7
27	R5-027	27.0	22.5	3.84	2.40	8.4
29	R5-029	29.0	24.2	4.44	2.60	8.7

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
23	▲ 20	▲ 20	23	23	▲ Precaución	21
25	20/21.5	20	26	23	23	24
27	23	23	26	27	25	24
29	24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


Aórtica Reducida Aórtica

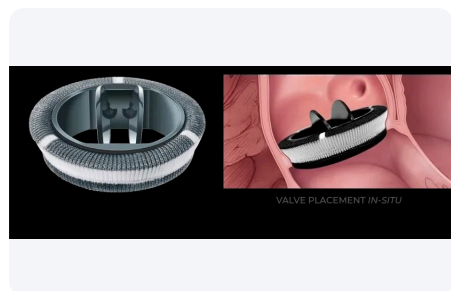

CarboMedics Reduced aórtica — Posición in situ · © Corcym

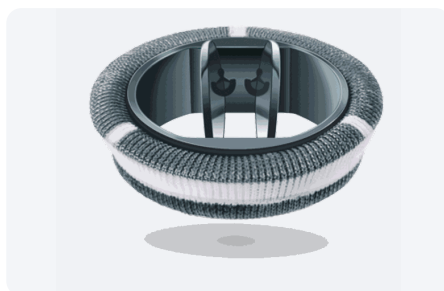


CarboMedics Reduced aórtica — Foto · © Corcym

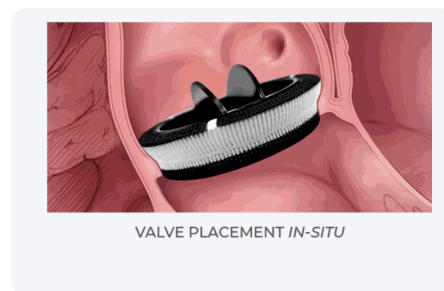


CarboMedics Reduced aórtica — Posición in situ · © Corcym



CarboMedics Reduced aórtica — Foto de catálogo · © Corcym

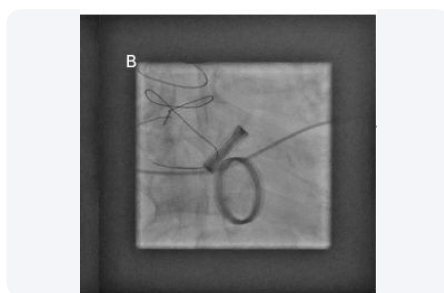

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)

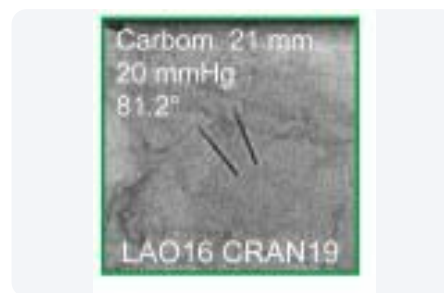

CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	EOA (cm²)	OH (mm)
19	A5-019	19.8	14.7	1.59	1.00	6.2
21	A5-021	21.8	16.7	2.07	1.50	6.6
23	A5-023	23.8	18.5	2.56	1.60	7.3
25	A5-025	25.8	20.5	3.16	2.00	7.7
27	A5-027	27.8	22.5	3.84	2.40	8.4
29	A5-029	29.8	24.2	4.44	2.60	8.7
31	A5-031	31.8	24.2	4.44	2.60	8.7

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
23	⚠ 20	⚠ 20	23	23	⚠ Precaución	21
25	20/21.5	20	26	23	23	24
27	23	23	26	27	25	24
29	24.5	26	29	27	27	27
31	24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Aórtica Top Hat (totalmente supraanular) Aórtica




CarboMedics Top Hat aórtica — Foto · © Corcym

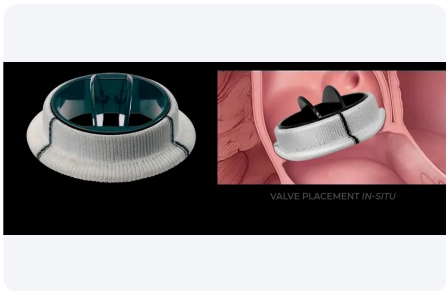


CarboMedics Top Hat aórtica — Posición in situ · © Corcym



CarboMedics Top Hat aórtica — Foto · © Corcym

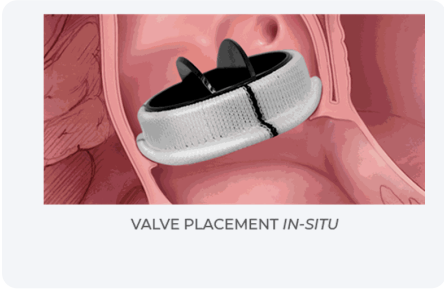

CarboMedics Top Hat aórtica — Posición in situ · © Corcym

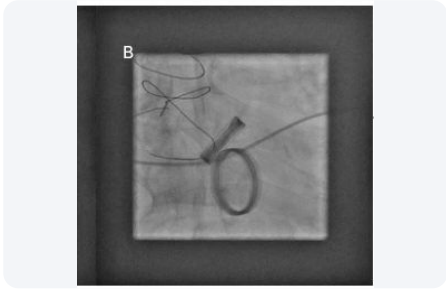

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)



CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	EOA (cm²)	OH (mm)
19	S5-019	14.7	14.7	1.59	1.00	6.2
21	S5-021	16.7	16.7	2.07	1.40	6.6
23	S5-023	18.5	18.5	2.56	1.90	7.3
25	S5-025	20.5	20.5	3.16	2.20	7.7
27	S5-027	22.5	22.5	3.84	2.90	8.4

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
23	▲ 20	▲ 20	23	23	▲ Precaución	21
25	20/21.5	20	26	23	23	24
27	23	23	26	27	25	24

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


Aórtica Orbis Aórtica




Carbomedics Orbis aórtica — Foto · © Corcym



CarboMedics Orbis aórtica — Foto de catálogo · © Corcym

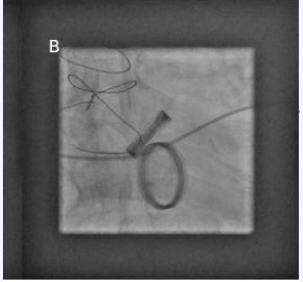

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)

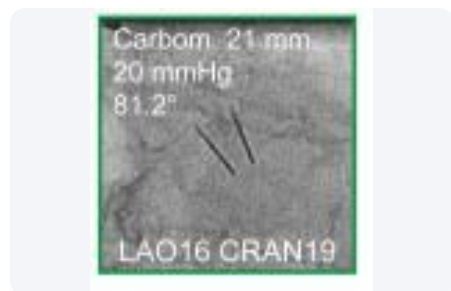

CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	EOA (cm ²)	OH (mm)
19	A1-019	18.8	14.7	1.59	1.00	6.2
21	A1-021	20.8	16.7	2.07	1.50	6.6
23	A1-023	22.6	18.5	2.56	1.60	7.3
25	A1-025	25.0	20.5	3.16	2.00	7.7
27	A1-027	27.0	22.5	3.84	2.40	8.4
29	A1-029	29.0	24.2	4.44	2.60	8.7
31	A1-031	31.0	24.2	4.44	2.60	8.7

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
23	▲ 20	▲ 20	23	23	▲ Precaución	21
25	20/21.5	20	26	23	23	24
27	23	23	26	27	25	24
29	24.5	26	29	27	27	27
31	24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


Mitral Estándar Mitral

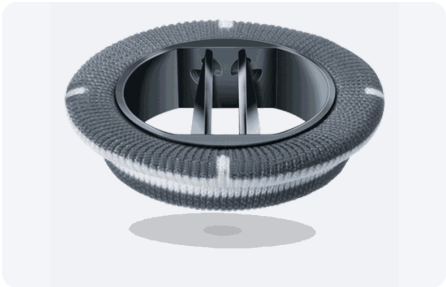

CarboMedics Standard mitral — Foto · © Corcym

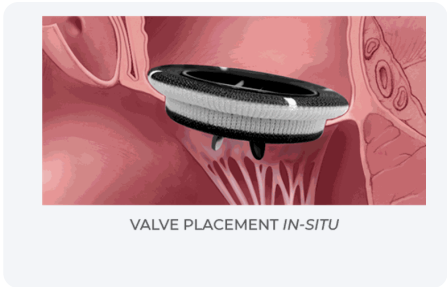

CarboMedics Standard mitral — Posición in situ · © Corcym

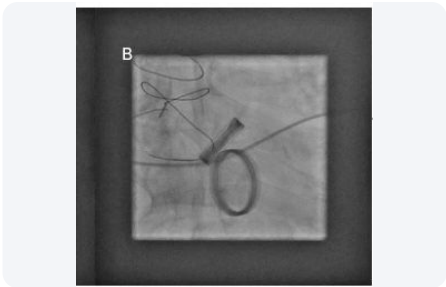

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)



CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	OH (mm)
16	M7-016	16.2	14.7	1.59	6.2
18	M7-018	18.8	14.7	1.59	6.2
21	M7-021	21.8	16.7	2.07	6.6
23	M7-023	23.8	18.5	2.56	7.3
25	M7-025	25.8	20.5	3.16	7.7
27	M7-027	27.8	22.5	3.84	8.4
29	M7-029	29.8	24.2	4.44	8.7
31	M7-031	31.8	24.2	4.44	8.7
33	M7-033	33.8	24.2	4.44	8.7

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.


FUENTES

Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>


Mitral Optiform Mitral



CarboMedics Optiform mitral — Foto · © Corcym

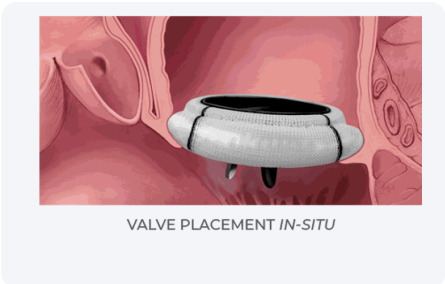

CarboMedics Optiform mitral — Posición in situ · © Corcym

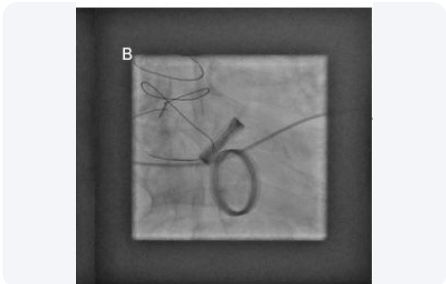

CarboMedics — Fluoroscopia (vista general)



CarboMedics 21 mm — Fluoroscopia LAO16 CRAN19

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	OH (mm)
23	F7-023	22.6	18.5	2.56	7.3
25	F7-025	25.0	20.5	3.16	7.7
27	F7-027	27.0	22.5	3.84	8.4
29	F7-029	29.0	24.2	4.44	8.7
31	F7-031	31.0	24.2	4.44	8.7
33	F7-033	33.0	24.2	4.44	8.7

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

- Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>

Mitral Orbis Mitral

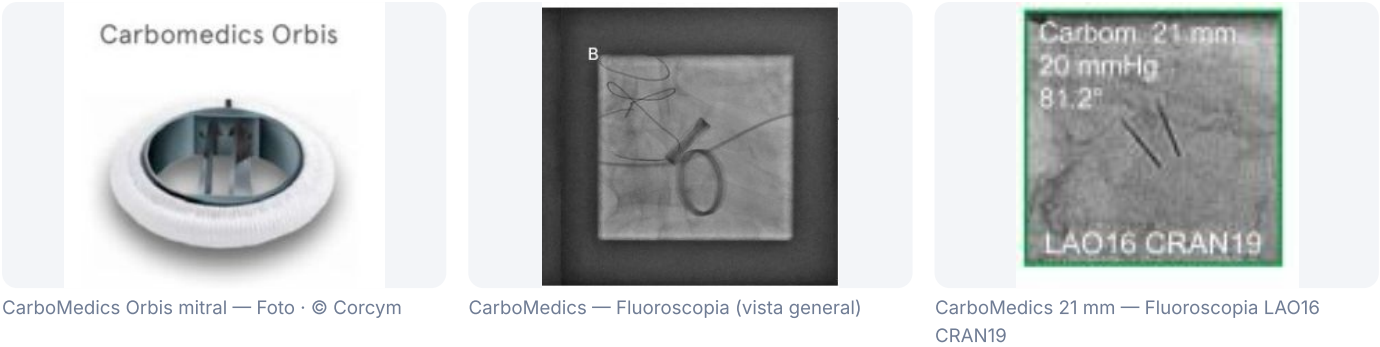

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tiene un anillo de alojamiento de titanio reforzado con otro anillo de titanio de mayor radiopacidad que permite la rotación de la válvula para una orientación óptima tras la implantación.
- El área de pivote cavitada está incrustada dentro de una carcasa de carbón pirolítico en la que se alojan las bisagras de la válvula.
- El diámetro de borde a borde es mayor que el diámetro de bisagra a bisagra porque este diseño de pivote altera la forma circular del orificio valvular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	OH (mm)
21	M2-021	20.8	16.7	2.07	6.6
23	M2-023	22.6	18.5	2.56	7.3
25	M2-025	25.0	20.5	3.16	7.7
27	M2-027	27.0	22.5	3.84	8.4
29	M2-029	29.0	24.2	4.44	8.7
31	M2-031	31.0	24.2	4.44	8.7
33	M2-033	33.0	24.2	4.44	8.7

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

- Corcym — CarboMedics™ Family brochure CC-MK-00003 A (2021) — <https://www.corcym.com/devices/aortic/US/carbo-medics>

Contacto del fabricante: Corcym S.r.l. · communication@corcym.com · Via Giovanni Spadolini 7, Centro Leoni, 20141 Milano, Italy · <https://www.corcym.com/contact-us>

Aórtica Estándar

Aórtica



Edwards Duromedics Estándar aórtica — Foto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)
19	19.0	15.0	1.77	7.0
21	21.0	17.0	2.27	7.5
23	23.0	19.0	2.84	8.0
25	25.0	21.0	3.46	8.5
27	27.0	23.0	4.15	9.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
23	20	20	23	23	23	21
25	21.5	23	26	23/27	23/25	24
27	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Mitral Estándar

Mitral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)
19	19.0	15.0	1.77	7.0
21	21.0	17.0	2.27	7.5
23	23.0	19.0	2.84	8.0
25	25.0	21.0	3.46	8.5
27	27.0	23.0	4.15	9.0

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Contacto del fabricante: Edwards Lifesciences Corp. · +1 949 250 2500 · One Edwards Way, Irvine, CA 92614, USA · <https://www.edwards.com/about-us/global-locations>

Aórtica Estándar Aórtica



HP-Biplus — Foto y fluoroscopia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)
19	19.0	15.2	1.81	6.7
21	21.0	17.2	2.32	7.1
23	23.0	19.2	2.90	7.6
25	25.0	21.2	3.53	8.1
27	27.0	23.2	4.23	8.6

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
23	20	20	23	23	23	21
25	21.5	23	26	27	25	24
27	24.5	23	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

HP-Biplus C Aórtica

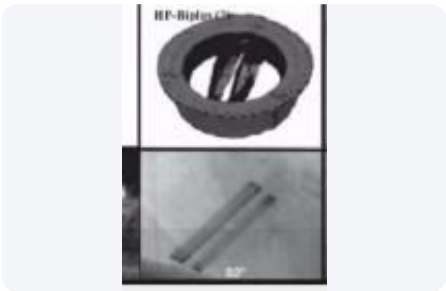

HP-Biplus — Foto y fluoroscopia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)
19	19.0	15.5	1.89	6.5
21	21.0	17.5	2.41	7.0
23	23.0	19.5	2.99	7.5
25	25.0	21.5	3.63	8.0
27	27.0	23.5	4.34	8.5

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
23	20	20	23	23	23	21
25	21.5/23	23	26	27	25	24
27	23/24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Aórtica Estándar Aórtica



Jyros aórtica — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)



Jyros aórtica — Foto, discos cerrados · Smithsonian NMAH (CC0)



Jyros aórtica — Foto oblicua · Smithsonian NMAH (CC0)



Jyros — Foto y fluoroscopia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)
19	19.0	15.0	1.77	6.5
21	21.0	17.0	2.27	7.0
23	23.0	19.0	2.84	7.5
25	25.0	21.0	3.46	8.0
27	27.0	23.0	4.15	8.5

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
23	20	20	23	23	23	21
25	21.5	23	26	23/27	23/25	24
27	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Smithsonian National Museum of American History — Jyros Bileaflet Heart Valve (object nmah_1726314) — https://www.si.edu/object/jyros-bileaflet-heart-valve:nmah_1726314
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Medtronic Open Pivot™ (ATS)

Medtronic (antes ATS Medical)


Open Pivot™ Aórtica Estándar (intraanular) Aórtica

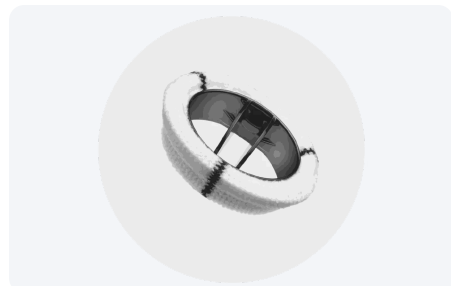


Medtronic Open Pivot Estándar aórtica — Foto · © Medtronic




Medtronic Open Pivot — Foto · © Medtronic

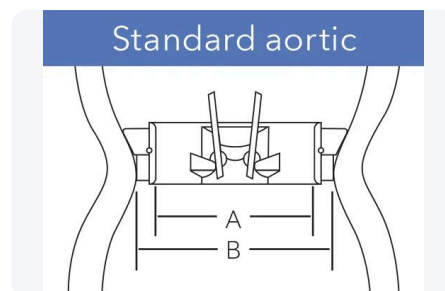

Medtronic Open Pivot Estándar aórtica — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular) · © Medtronic

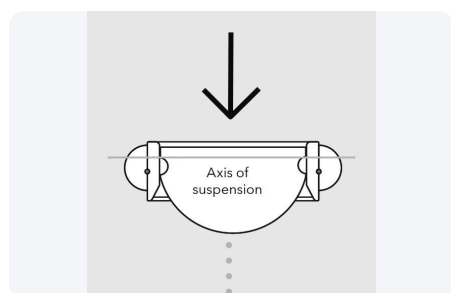

Medtronic Open Pivot — Esquema (eje de pivote) · © Medtronic

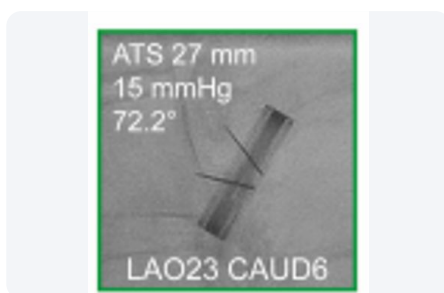

Medtronic ATS 27 mm — Fluoroscopia LAO23 CAUD6



Medtronic ATS aórtica — Fluoroscopia (apertura 85°)

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Apariencia similar a la de CarboMedics con algunas diferencias.
- Los discos tienen mayor visibilidad por el alto contenido de tungsteno del sustrato.
- Perfil de anillo de titanio plano de la válvula ATS: similar al de algunos modelos CM; sin embargo, el anillo de rotación de titanio tiene mayor radiopacidad.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Perfil total (mm)	Perfil entrada (mm)	Perfil salida (mm)
19	500FA19	19.2	14.8	1.55	—	—	—
21	500FA21	21.2	16.8	2.02	10.3	2.9	7.4
23	500FA23	23.2	18.8	2.56	11.3	3.4	7.9
25	500FA25	25.2	20.8	3.17	12.3	3.1	9.2
27	500FA27	27.2	22.8	3.84	13.3	3.4	9.9
29	500FA29	29.2	24.8	4.59	14.3	3.9	10.4
31	500FA31	31.2	26.8	5.35	—	—	—

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
23	20/21.5	20	23	23	23	21
25	20/21.5	20/23	26	23	23	24
27	23	23	26	27	25	24/26
29	24.5/26	26	29	31	27	27
31	27.5	29	34	31	29	30

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Medtronic — Open Pivot™ product pages (Standard and AP360™, aortic and mitral): tissue annulus and orifice inner diameter — <https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>
- ATS Medical — Open Pivot® IFU, Table 1: Valve Dimensions (profile heights, inside/outside diameter, orifice area)
- ATS Medical — ATS Open Pivot® Heart Valve Product Guide OPP0012R0; Medtronic Open Pivot™ UC201101694a (2011) — <https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Open Pivot™ AP / AP360™ Aórtica (supraanular) Aórtica

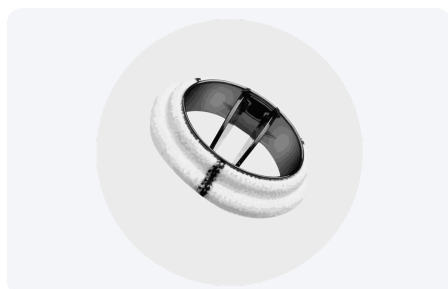


Medtronic Open Pivot AP360 aórtica — Foto · © Medtronic

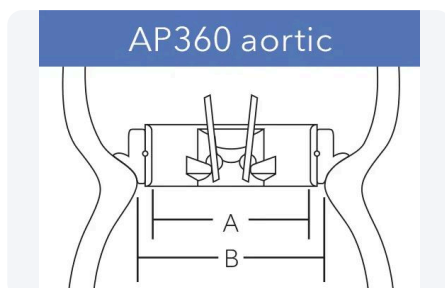


Medtronic Open Pivot AP360 aórtica — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular) · © Medtronic



Medtronic Open Pivot AP360 — Foto · © Medtronic

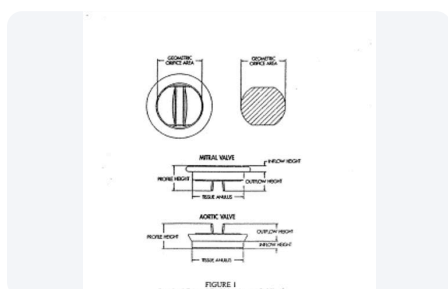

Medtronic Open Pivot Estándar / AP — Esquema de medidas (área del orificio y alturas) · © Medtronic

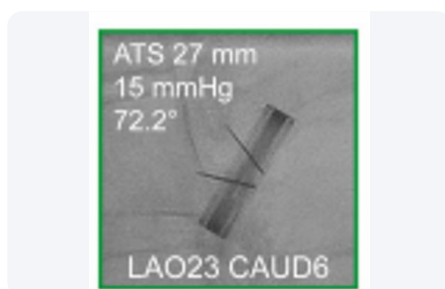

Medtronic ATS 27 mm — Fluoroscopia LAO23 CAUD6



Medtronic ATS aórtica — Fluoroscopia (apertura 85°)

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Apariencia similar a la de CarboMedics con algunas diferencias.
- Los discos tienen mayor visibilidad por el alto contenido de tungsteno del sustrato.
- Perfil de anillo de titanio plano de la válvula ATS: similar al de algunos modelos CM; sin embargo, el anillo de rotación de titanio tiene mayor radiopacidad.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.

- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Perfil total (mm)	Perfil entrada (mm)	Perfil salida (mm)
16	505DA16	16.2	14.8	1.55	—	—	—
18	505DA18	18.2	16.8	2.02	10.3	1.5	8.8
20	505DA20	20.2	18.8	2.56	11.3	1.5	9.8
22	505DA22	22.2	20.8	3.17	12.3	1.5	10.8
24	505DA24	24.2	22.8	3.84	13.3	1.5	11.8
26	505DA26	26.2	24.8	4.59	14.3	1.5	12.8
28	505DA28	28.2	26.8	5.35	—	—	—

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI


Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
16	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
18	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
20	20/21.5	20	23	23	23	21
22	20/21.5	20/23	26	23	23	24
24	23	23	26	27	25	24/27
26	24.5/26	26	29	31	27	27
28	27.5	29	34	31	29	30

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Medtronic — Open Pivot™ product pages (Standard and AP360™, aortic and mitral): tissue annulus and orifice inner diameter — <https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>
- ATS Medical — Open Pivot® IFU, Table 1: Valve Dimensions (profile heights, inside/outside diameter, orifice area)
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


Open Pivot™ Mitral Estándar Mitral

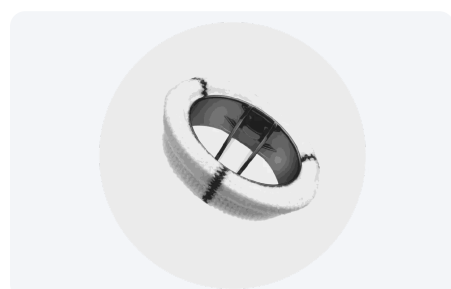


Medtronic Open Pivot Estándar aórtica — Foto · © Medtronic

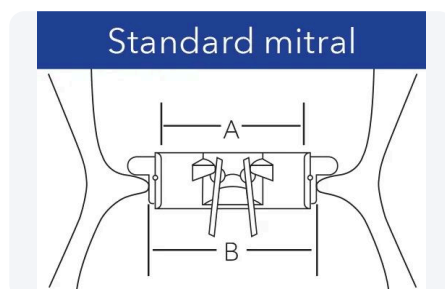


Medtronic Open Pivot Estándar mitral — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular) · © Medtronic

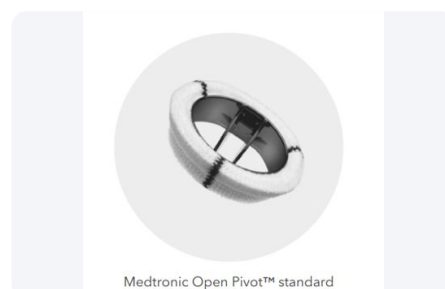


Medtronic Open Pivot Estándar — Foto · © Medtronic

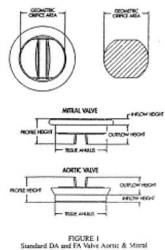

Medtronic Open Pivot Estándar / AP — Esquema de medidas (área del orificio y alturas) · © Medtronic

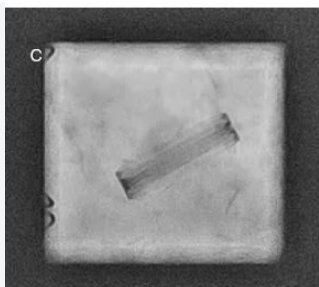

Medtronic ATS — Fluoroscopia (vista general)

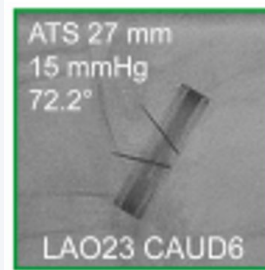

Medtronic ATS 27 mm — Fluoroscopia LAO23 CAUD6

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Apariencia similar a la de CarboMedics con algunas diferencias.
- Los discos tienen mayor visibilidad por el alto contenido de tungsteno del sustrato.
- Perfil de anillo de titanio plano de la válvula ATS: similar al de algunos modelos CM; sin embargo, el anillo de rotación de titanio tiene mayor radiopacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Perfil total (mm)	Perfil entrada (mm)	Perfil salida (mm)
19	500DM19	19.2	14.8	1.55	—	—	—
21	500DM21	21.2	16.8	2.02	—	—	—
23	500DM23	23.2	18.8	2.56	—	—	—
25	500DM25	25.2	20.8	3.17	—	—	—
27	500DM27	27.2	22.8	3.84	—	—	—
29	500DM29	29.2	24.8	4.59	14.3	3.7	10.6
31	500DM31	31.2	26.8	5.35	15.4	3.7	11.7
33	500DM33	33.2	26.8	5.35	15.4	3.7	11.7

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.


FUENTES

- Medtronic — Open Pivot™ product pages (Standard and AP360™, aortic and mitral): tissue annulus and orifice inner diameter — <https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>
- ATS Medical — Open Pivot® IFU, Table 1: Valve Dimensions (profile heights, inside/outside diameter, orifice area)

Open Pivot™ AP360™ Mitral (supraanular) Mitral

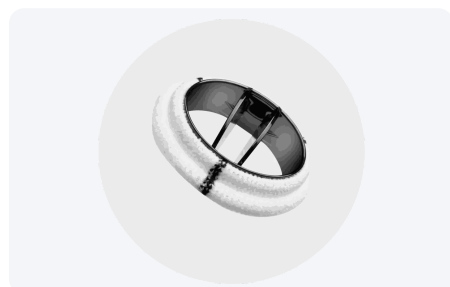


Medtronic Open Pivot AP360 aórtica — Foto · © Medtronic

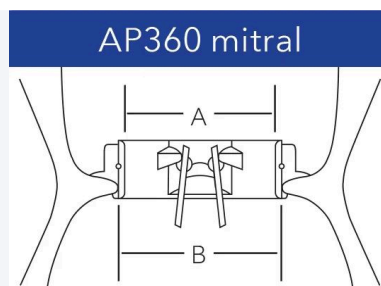


Medtronic Open Pivot AP360 mitral — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular) · © Medtronic



Medtronic Open Pivot AP360 — Foto · © Medtronic

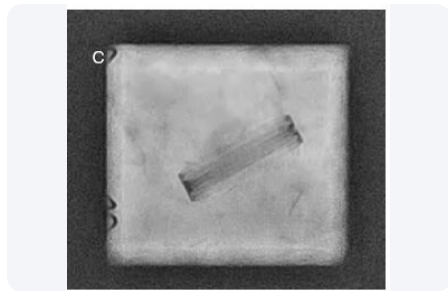

Medtronic ATS — Fluoroscopia (vista general)

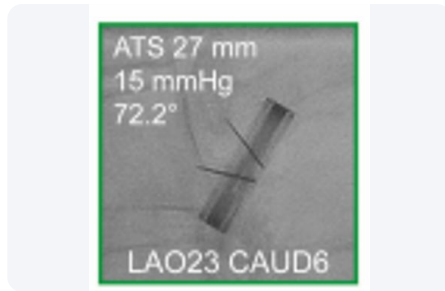

Medtronic ATS 27 mm — Fluoroscopia LAO23 CAUD6

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Apariencia similar a la de CarboMedics con algunas diferencias.
- Los discos tienen mayor visibilidad por el alto contenido de tungsteno del sustrato.
- Perfil de anillo de titanio plano de la válvula ATS: similar al de algunos modelos CM; sin embargo, el anillo de rotación de titanio tiene mayor radiopacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Perfil total (mm)	Perfil entrada (mm)	Perfil salida (mm)
16	505DM16	16.2	14.8	1.55	—	—	—
18	505DM18	18.2	16.8	2.02	—	—	—
20	505DM20	20.2	18.8	2.56	—	—	—
22	505DM22	22.2	20.8	3.17	—	—	—
24	505DM24	24.2	22.8	3.84	—	—	—
26	505DM26	26.2	24.8	4.59	14.3	3.7	10.6
28	505DM28	28.2	26.8	5.35	15.4	3.7	11.7

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES


- Medtronic — Open Pivot™ product pages (Standard and AP360™, aortic and mitral): tissue annulus and orifice inner diameter — <https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>
- ATS Medical — Open Pivot® IFU, Table 1: Valve Dimensions (profile heights, inside/outside diameter, orifice area)

Contacto del fabricante: Medtronic plc (ATS Medical) · +1 763 514 4000 · 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-5604, USA · <https://www.medtronic.com/en-us/contact-us.html>

Miltonia™ Aórtica Aórtica



Meril Miltonia — Foto · © Meril

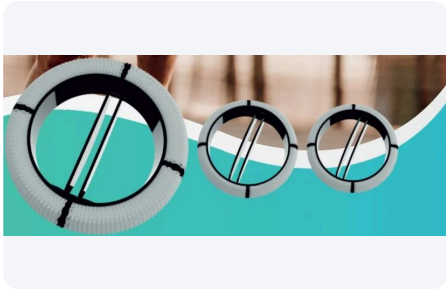

Meril Miltonia — Varias tallas (foto) · © Meril



Meril Miltonia (anillo de titanio y pivotes) — Imagen 3D · © Meril



Meril Miltonia aórtica — Varias tallas (foto) · © Meril

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
19	MLT19A	19.0	14.8	1.55	8.7	19.8
21	MLT21A	21.0	16.8	2.02	9.7	21.8
23	MLT23A	23.0	18.8	2.56	10.9	23.8
25	MLT25A	25.0	20.8	3.17	12.1	25.8
27	MLT27A	27.0	22.8	3.84	13.1	27.8

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	23	▲ Precaución	21
23	20	20	23	23	23	21
25	21.5/23	23	26	27	25	24
27	23/24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)


FUENTES

- Meril Life Sciences — MILTONIA™ Bi-Leaflet Mechanical Valve brochure MLT/BROCHURE/003/MLS/20231120/GLOBAL (Ordering information; implant-height table) — https://strapi.merillife.com/uploads/miltonia_1702448206pdf_32c38dec34.pdf
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Miltonia™ Aórtica Advanced Performance (AP) Aórtica



Meril Miltonia — Foto · © Meril

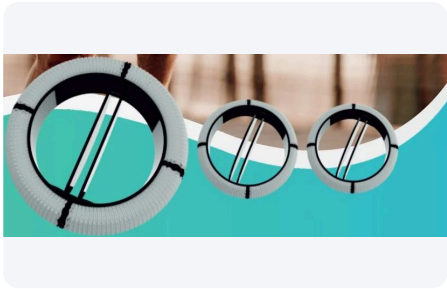

Meril Miltonia — Varias tallas (foto) · © Meril



Meril Miltonia (anillo de titanio y pivotes) — Imagen 3D · © Meril



Meril Miltonia aórtica — Varias tallas (foto) · © Meril

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
16	MLT16AP	16.2	14.8	1.55	8.7	8.7	19.8
18	MLT18AP	18.2	16.8	2.02	9.7	9.7	21.8
20	MLT20AP	20.2	18.8	2.56	—	10.9	23.8

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.


FUENTES

Meril Life Sciences — MILTONIA™ Bi-Leaflet Mechanical Valve brochure MLT/BROCHURE/003/MLS/20231120/GLOBAL (Ordering information; implant-height table) — https://strapi.merillife.com/uploads/miltonia_1702448206pdf_32c38dec34.pdf

Miltonia™ Mitral Mitral




Meril Miltonia — Foto · © Meril

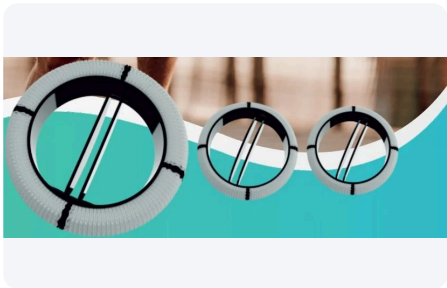

Meril Miltonia — Varias tallas (foto) · © Meril



Meril Miltonia (anillo de titanio y pivotes) — Imagen 3D · © Meril

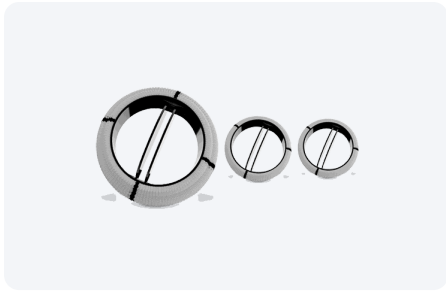

Meril Miltonia aórtica — Varias tallas (foto) · © Meril

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
23	MLT23M	23.8	18.8	2.56	6.7	11.5	31.0
25	MLT25M	25.8	20.8	3.17	7.1	12.5	33.0
27	MLT27M	27.8	22.8	3.84	7.9	13.5	35.0
29	MLT29M	29.8	24.8	4.59	8.9	14.4	37.0
31	MLT31M	31.8	26.8	5.37	8.9	14.4	39.0
33	MLT33M	33.8	26.8	5.37	9.1	15.4	41.0

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

Meril Life Sciences — MILTONIA™ Bi-Leaflet Mechanical Valve brochure MLT/BROCHURE/003/MLS/20231120/GLOBAL (Ordering information; implant-height table) — https://strapi.merillife.com/uploads/miltonia_1702448206pdf_32c38dec34.pdf

Contacto del fabricante: Meril Life Sciences Pvt. Ltd. · +91 260 350 9400, +91 260 240 8000 · askinfo@merillife.com · Meril Corporate Office, Near Bilakhia Stadium, Muktanand Marg, Chala, Vapi 396 191, Gujarat, India · <https://www.merillife.com/contact-us>

Anillo de sutura Conform-X® Aórtica



On-X Conform-X aórtica — Foto · © Artivion



On-X aórtica — Foto · © Artivion



On-X aórtica — Foto lateral · © Artivion



On-X anillo, entrada acampanada y protectores de pivote — Foto de detalle · © Artivion



On-X 1996 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Orificio: sustrato de grafito recubierto de Carbón On-X® (forma pura no aleada de carbón pirolítico).
- Discos: Carbón On-X® depositado sobre un sustrato de grafito impregnado con un 10 % en peso de tungsteno para proporcionar radiopacidad.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
19	ONXACE-19	19.0	17.4	2.28	27	10.8	13.3
21	ONXACE-21	21.0	19.4	2.84	30	11.9	14.7
23	ONXACE-23	23.0	21.4	3.44	33	13.1	16.1
25	ONXACE-25	25.0	23.4	4.11	34	14.2	17.8
27/29	ONXACE-27/29	27-29	23.4	4.11	36	14.2	17.8

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	23/27	23/25	24
25	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
27	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27
29	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

■ On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 (06/2017) — <https://www.onxlti.com/wp-content/uploads/2019/05/010122103A-On-X-IFU-Booklet-English-Website-Version.pdf>

■ Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Anillo de sutura Anatomic Aórtica




On-X Anatomic aórtica — Foto · © Artivion

On-X aórtica — Foto · © Artivion

On-X aórtica — Foto lateral · © Artivion



On-X anillo, entrada acampanada y protectores de pivote — Foto de detalle · © Artivion

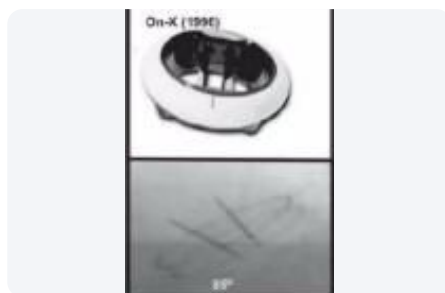

On-X 1996 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Orificio: sustrato de grafito recubierto de Carbón On-X® (forma pura no aleada de carbón pirolítico).
- Discos: Carbón On-X® depositado sobre un sustrato de grafito impregnado con un 10 % en peso de tungsteno para proporcionar radiopacidad.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm ²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
19	ONXANE-19	19.0	17.4	2.28	27	10.8	13.3
21	ONXANE-21	21.0	19.4	2.84	30	11.9	14.7
23	ONXANE-23	23.0	21.4	3.44	33	13.1	16.1
25	ONXANE-25	25.0	23.4	4.11	34	14.2	17.8
27/29	ONXANE-27/29	27-29	23.4	4.11	36	14.2	17.8

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	23/27	23/25	24
25	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27
27	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27
29	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 (06/2017) — <https://www.onxlti.com/wp-content/uploads/2019/05/010122103A-On-X-IFU-Booklet-English-Website-Version.pdf>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

Anillo de sutura estándar **Aórtica**



On-X Standard aórtica — Foto · © Artivion




On-X aórtica — Foto · © Artivion



On-X aórtica — Foto lateral · © Artivion



On-X anillo, entrada acampanada y protectores de pivote — Foto de detalle · © Artivion

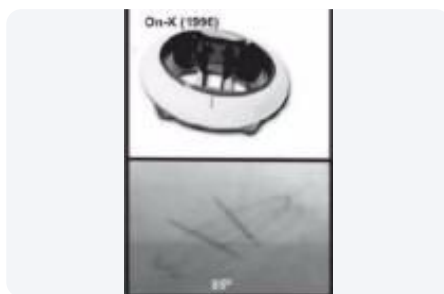

On-X 1996 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Orificio: sustrato de grafito recubierto de Carbón On-X® (forma pura no aleada de carbón pirolítico).
- Discos: Carbón On-X® depositado sobre un sustrato de grafito impregnado con un 10 % en peso de tungsteno para proporcionar radiopacidad.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm ²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
19	ONXAE-19	19.0	17.4	2.28	23	10.8	13.3

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm ²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
21	ONXAE-21	21.0	19.4	2.84	26	11.9	14.7
23	ONXAE-23	23.0	21.4	3.44	29	13.1	16.1
25	ONXAE-25	25.0	23.4	4.11	32	14.2	17.8
27/29	ONXAE-27/29	27-29	23.4	4.11	34	14.2	17.8

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	23/27	23/25	24
25	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27
27	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27
29	23/24.5	23	26/29	27	25/27	24/27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 (06/2017) — <https://www.onxlti.com/wp-content/uploads/2019/05/010122103A-On-X-IFU-Booklet-English-Website-Version.pdf>
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

On-X® Mitral (anillo estándar) Mitral



On-X mitral — Foto · © Artivion



On-X mitral — Esquema (características de diseño) · © Artivion



On-X mitral — Foto · © Artivion



On-X 1996 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Orificio: sustrato de grafito recubierto de Carbón On-X® (forma pura no aleada de carbón pirolítico).
- Discos: Carbón On-X® depositado sobre un sustrato de grafito impregnado con un 10 % en peso de tungsteno para proporcionar radiopacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
23	ONXM-23	23.0	21.4	3.44	31	13.1	16.1
25	ONXM-25	25.0	23.4	4.11	33	14.2	17.8
27/29	ONXM-27/29	27-29	23.4	4.11	34	14.2	17.8
31/33	ONXM-31/33	31-33	23.4	4.11	36	14.2	17.8

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 (06/2017) — <https://www.onxlti.com/wp-content/uploads/2019/05/010122103A-On-X-IFU-Booklet-English-Website-Version.pdf>

On-X® Mitral Conform-X® Mitral



On-X mitral — Foto · © Artivion



On-X mitral — Esquema (características de diseño) · © Artivion



On-X mitral — Foto · © Artivion



On-X 1996 — Foto y fluoroscopia

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Orificio: sustrato de grafito recubierto de Carbón On-X® (forma pura no aleada de carbón pirolítico).
- Discos: Carbón On-X® depositado sobre un sustrato de grafito impregnado con un 10 % en peso de tungsteno para proporcionar radiopacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	Área orificio (cm²)	Ø anillo sutura (mm)	Perfil h cerrada (mm)	Perfil H abierta (mm)
25/33	ONXMC-25/33	25-33	23.4	4.11	39	14.2	17.8

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 (06/2017) — <https://www.onxlti.com/wp-content/uploads/2019/05/010122103A-On-X-IFU-Booklet-English-Website-Version.pdf>

Contacto del fabricante: Artivion, Inc. (On-X®) · +1 770 419 3355, +1 800 438 8285 · 1655 Roberts Blvd NW, Kennesaw, GA 30144, USA, On-X Life Technologies: 1300 East Anderson Lane, Bldg B, Austin, TX 78752, USA · <https://artivion.com/contact/>

SJM Regent™ — Manguito estándar


Aórtica




SJM Regent manguito estándar — Foto · © Abbott




SJM Regent aórtica 23 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

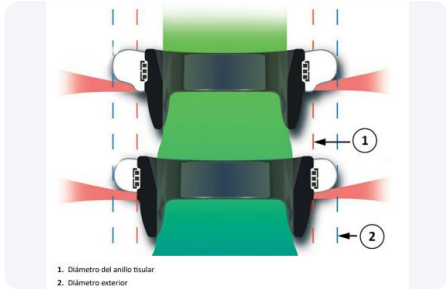

SJM Masters — Esquema de medidas (anillo tisular / diámetro exterior)

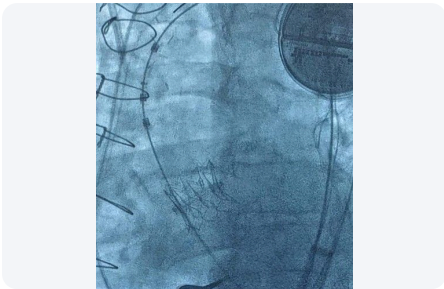

SJM Regent aórtica — Fluoroscopia

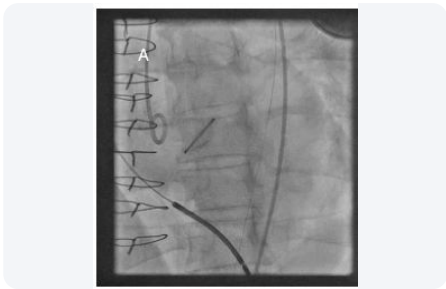

SJM — Fluoroscopia (vista general)

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo no es radiopaco (característica más distintiva).
- Solo se ven los discos, moviéndose como 'alas de mariposa' en la vista lateral.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
17	17AGN-751	17.0	—	1.90	6.1	11.6	24.7
19	19AGN-751	19.0	17.8	2.40	6.1	11.6	24.7
21	21AGN-751	21.0	19.6	2.90	7.3	13.0	26.7
23	23AGN-751	23.0	21.4	3.50	8.0	14.3	28.7
25	25AGN-751	25.0	23.0	4.00	8.2	14.6	30.7
27	27AGN-751	27.0	24.9	4.70	9.1	15.4	32.7

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
17	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	23	⚠ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	27	25	24

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
25	23	23	26	27	25	24
27	24.5/26	26	29	31	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Abbott — Regent™ Aortic Mechanical Heart Valve — product page, ordering information — <https://www.cardiovascular.abbott/us/en/hcp/products/structural-heart/surgical-valve-solutions/regent-valve.html>
- St. Jude Medical — Regent™ FlexCuff ordering information (2013) — valve orifice inner diameter — https://hcvicor.github.io/ViMech_app/assets/SJM_Regent/regent-mechanical-heart-valve-flexcuff.pdf
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).


SJM Regent™ — FlexCuff **Aórtica**




SJM Regent FlexCuff — Foto · © Abbott




SJM Regent aórtica 23 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

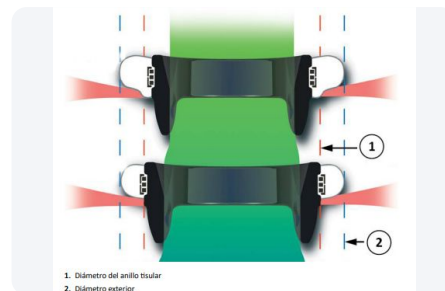

SJM Masters — Esquema de medidas (anillo tisular / diámetro exterior)

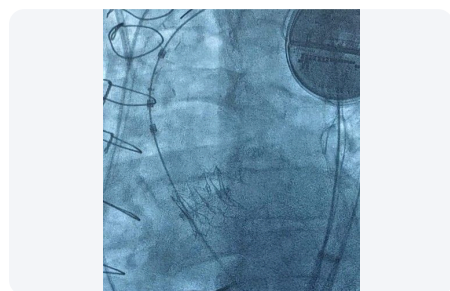

SJM Regent aórtica — Fluoroscopia

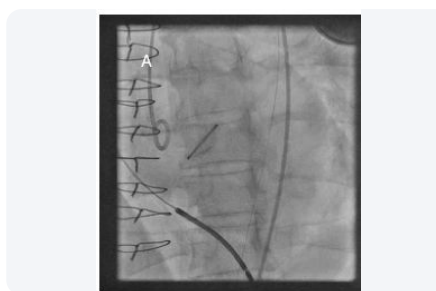

SJM — Fluoroscopia (vista general)

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- El anillo no es radiopaco (característica más distintiva).
- Solo se ven los discos, moviéndose como 'alas de mariposa' en la vista lateral.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
17	17AGFN-756	17.0	—	1.90	6.1	11.6	24.7
19	19AGFN-756	19.0	17.8	2.40	6.1	11.6	27.0
21	21AGFN-756	21.0	19.6	2.90	7.3	13.0	29.0
23	23AGFN-756	23.0	21.4	3.50	8.0	14.3	31.0
25	25AGFN-756	25.0	23.0	4.00	8.2	14.6	33.0

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
27	27AGFN-756	27.0	24.9	4.70	9.1	15.4	35.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
17	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	23	▲ Precaución	21
21	20/21.5	20	23	23	23	21
23	21.5	23	26	27	25	24
25	23	23	26	27	25	24
27	24.5/26	26	29	31	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Abbott — Regent™ Aortic Mechanical Heart Valve — product page, ordering information — <https://www.cardiovascular.abbott/us/en/hcp/products/structural-heart/surgical-valve-solutions/regent-valve.html>
- St. Jude Medical — Regent™ FlexCuff ordering information (2013) — valve orifice inner diameter — https://hcvicor.github.io/ViMech_app/assets/SJM_Regent/regent-mechanical-heart-valve-flexcuff.pdf
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

SJM Masters™ — Serie HP Aórtica




SJM Masters HP aórtica 23 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CCO)



SJM Masters HP aórtica — Foto · © Abbott



SJM Masters HP aórtica y mitral — Vista de perfil · © Abbott

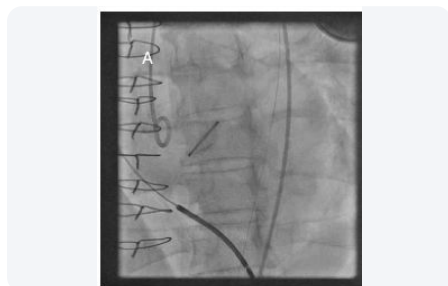

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tienen un anillo radiopaco.
- Los discos permanecen suspendidos más lejos del plano del anillo porque, a diferencia de otras válvulas bidisco, tiene un punto de pivote más alto.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.

- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
17	17AHPJ-505	17.0	—	1.60	4.6	9.8	22.0/22.5
19	19AHPJ-505	19.0	16.6	2.10	5.2	10.6	24.0/24.0
21	21AHPJ-505	21.0	18.6	2.60	6.0	12.1	26.0/26.5
23	23AHPJ-505	23.0	20.4	3.10	6.2	13.3	28.5/29.0
25	25AHPJ-505	25.0	22.4	3.80	6.7	13.9	30.5/30.5
27	27AHPJ-505	27.0	24.2	4.40	7.5	14.6	32.5/33.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
17	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución
19	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ Precaución	⚠ 23	⚠ Precaución	⚠ Precaución
21	⚠ 20/21.5	⚠ 20	23	23	⚠ 23	21
23	20/21.5	20	23/26	23	23	21/24
25	23	23	26	27	25	24
27	24.5	26	29	27	27	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf
- Chambers JB, Oo L, Narracott A, et al. Nominal size in six bileaflet mechanical aortic valves: a comparison of orifice size and biologic equivalence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125(6):1388-93 (Table 1, measured inside diameter) — [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(03\)00039-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(03)00039-4)
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

SJM Masters™ — Manguito de poliéster Aórtica




SJM Masters aórtica 27 mm (manguito de poliéster) — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)



SJM Masters manguito estándar — Foto · © Abbott



SJM Masters manguito expandido — Foto · © Abbott

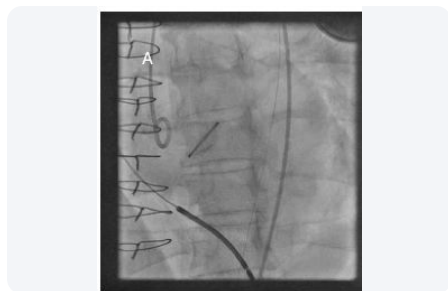

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tienen un anillo radiopaco.
- Los discos permanecen suspendidos más lejos del plano del anillo porque, a diferencia de otras válvulas bidisco, tiene un punto de pivote más alto.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm ²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
19	19AJ-501	19.0	14.8	1.60	3.5	9.8	22.5/23.0
21	21AJ-501	21.0	16.6	2.10	3.9	10.6	24.5/24.5
23	23AJ-501	23.0	18.6	2.60	5.2	12.1	27.0/28.0
25	25AJ-501	25.0	20.4	3.10	5.5	13.3	29.5/30.0
27	27AJ-501	27.0	22.5	3.80	5.8	13.9	31.0/32.0
29	29AJ-501	29.0	—	4.40	6.5	14.6	33.5/34.0
31	31AJ-501	31.0	—	5.10	7.3	16.0	35.5/37.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ 23	▲ Precaución	▲ Precaución
23	▲ 20/21.5	▲ 20	23	23	▲ 23	21
25	20/21.5	20	23/26	23	23	21
27	23	23	26	27	25	24
29	24.5	26	29	27	27	27
31	26/27.5	26	29	31	29	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

● Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf

● Chambers JB, Oo L, Narracott A, et al. Nominal size in six bileaflet mechanical aortic valves: a comparison of orifice size and biologic equivalence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125(6):1388-93 (Table 1, measured inside diameter) — [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(03\)00039-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(03)00039-4)


SJM Masters™ — Manguito de PTFE **Aórtica**



SJM Masters manguito estándar — Foto · © Abbott



SJM Masters aórtica 27 mm (manguito de poliéster) — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

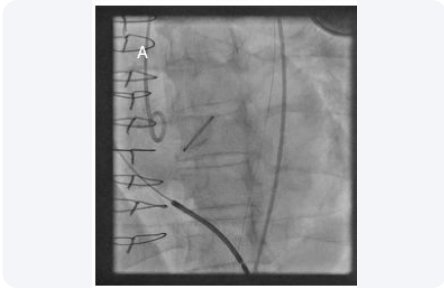

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

IDENTIFICACIÓN FLUOROSCÓPICA

- Tienen un anillo radiopaco.
- Los discos permanecen suspendidos más lejos del plano del anillo porque, a diferencia de otras válvulas bidisco, tiene un punto de pivote más alto.

POSICIONAMIENTO Y DESPLIEGUE

- Evite el marcapasos rápido para permitir que el disco embolice hacia el lado aórtico.
- Con válvula BE: posición objetivo 80/20 aórtico/ventricular.
- Con válvula SE: profundidad objetivo de hasta 3 mm en el ventrículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	DI (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
19	19ATJ-503	19.0	14.8	1.60	3.5	9.8	24.0
21	21ATJ-503	21.0	16.6	2.10	3.9	10.6	26.0
23	23ATJ-503	23.0	18.6	2.60	5.2	12.1	28.5
25	25ATJ-503	25.0	20.4	3.10	5.5	13.3	30.5
27	27ATJ-503	27.0	22.5	3.80	5.8	13.9	32.5
29	29ATJ-503	29.0	—	4.40	6.5	14.6	35.0
31	31ATJ-503	31.0	—	5.10	7.3	16.0	37.0

SELECCIÓN DE TAMAÑO TAVI

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
19	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución
21	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ Precaución	▲ 23	▲ Precaución	▲ Precaución
23	▲ 20/21.5	▲ 20	23	23	▲ 23	21

Talla	Myval	SAPIEN 3	Evolut	Allegra	Navitor	VitaFlow
25	20/21.5	20	23/26	23	23	21
27	23	23	26	27	25	24
29	24.5	26	29	27	27	27
31	26/27.5	26	29	31	29	27

Fuente: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)

FUENTES

- Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf
- Chambers JB, Oo L, Narracott A, et al. Nominal size in six bileaflet mechanical aortic valves: a comparison of orifice size and biologic equivalence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125(6):1388-93 (Table 1, measured inside diameter) — [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(03\)00039-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(03)00039-4)
- Datos propios de la unidad de investigación del hospital (ICICOR).

SJM Masters™ — Manguito de poliéster (mitral) Mitral




SJM Masters mitral — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)



SJM Masters mitral 31 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)



SJM Masters manguito estándar — Foto · © Abbott

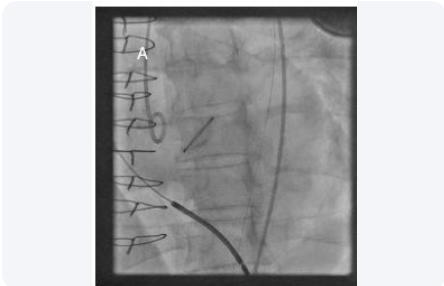

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
19	19MJ-501	19.0	1.60	3.8	9.8	23.0/24.0
21	21MJ-501	21.0	2.10	3.7	10.6	25.0/25.5
23	23MJ-501	23.0	2.60	4.6	12.1	28.0/28.5
25	25MJ-501	25.0	3.10	5.2	13.3	30.0/30.5
27	27MJ-501	27.0	3.80	5.8	13.9	32.0/32.0
29	29MJ-501	29.0	4.40	6.7	14.6	34.5/35.0
31	31MJ-501	31.0	5.10	7.1	16.0	36.5/37.0
33	33MJ-501	33.0	5.10	8.3	16.0	38.0/38.5

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.


FUENTES

■ Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf

SJM Masters™ — Serie HP (mitral) Mitral




SJM Masters mitral — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

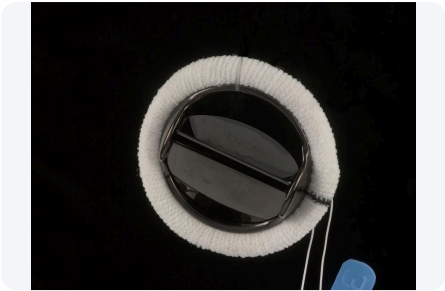

SJM Masters mitral 31 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)



SJM Masters HP aórtica y mitral — Vista de perfil · © Abbott

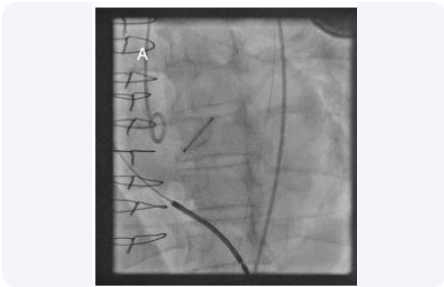

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
17	17MHPJ-505	17.0	1.60	2.4	9.8	22.0
19	19MHPJ-505	19.0	2.10	2.7	10.6	24.0
21	21MHPJ-505	21.0	2.60	3.0	12.1	26.0
23	23MHPJ-505	23.0	3.10	3.2	13.3	28.5
25	25MHPJ-505	25.0	3.80	3.8	13.9	30.5
27	27MHPJ-505	27.0	4.40	4.6	14.6	32.0

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.


FUENTES

■ Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf


SJM Masters™ — Manguito de PTFE (mitral) Mitral




SJM Masters mitral — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

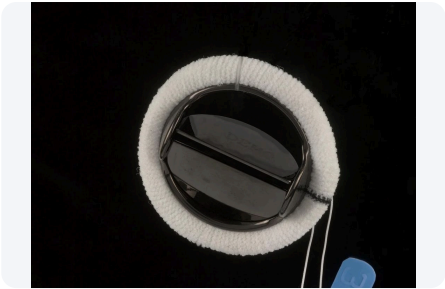

SJM Masters mitral 31 mm — Foto · Smithsonian NMAH (CC0)

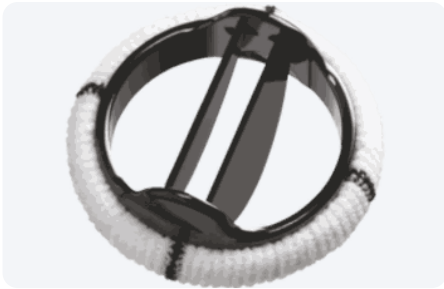

SJM Masters manguito estándar — Foto · © Abbott

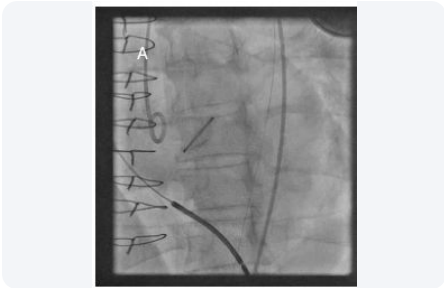

SJM — Fluoroscopia (vista general)



SJM 23 mm — Fluoroscopia LAO28 CAUD9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla (mm)	Modelo / código	TAD (mm)	GOA (cm²)	Altura implante (mm)	Altura total (mm)	Ø anillo sutura (mm)
19	19MTJ-503	19.0	1.60	3.8	9.8	24.5
21	21MTJ-503	21.0	2.10	3.7	10.6	26.5
23	23MTJ-503	23.0	2.60	4.6	12.1	29.0
25	25MTJ-503	25.0	3.10	5.2	13.3	31.0
27	27MTJ-503	27.0	3.80	5.8	13.9	33.0
29	29MTJ-503	29.0	4.40	6.7	14.6	35.5
31	31MTJ-503	31.0	5.10	7.1	16.0	37.5
33	33MTJ-503	33.0	5.10	8.3	16.0	39.5

Sin tabla de tamaño TAVI para este modelo.

FUENTES

■ Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions — https://manuals.eifu.abbott/content/dam/av/manuals-eifu/global/AL/en/ARTMT600261317_C.pdf

Contacto del fabricante: Abbott (St. Jude Medical™) · +1 224 667 6100 · 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6400, USA · <https://www.cardiovascular.abbott/us/en/contact-us.html>

5 Dispositivos TAVI en la simulación

Diámetro = talla nominal etiquetada. Origen de la altura de cada dispositivo:

Dispositivo	Tallas (mm)	Altura (mm)	Fuente
SAPIEN 3	20 · 23 · 26 · 29	15.5 · 18 · 20 · 22.5 altura del fabricante	IFU Edwards SAPIEN 3 / SAPIEN 3 Ultra (DOC-0160200A), Tablas 1a–1b, altura de la válvula https://eifu.edwards.com/eifu/5970f1a946e0fb00015e5f4c/DOC-0160200A.pdf
Myval	20 · 21.5 · 23 · 24.5 · 26 · 27.5 · 29 · 30.5 · 32	17 · 17.5 · 18 · 18.5 · 19 · 19.5 · 21 · 21 · 21 altura aproximada (interpolada del rango publicado)	Folleto Meril Myval: altura del stent 17–21 mm (rango; valores por talla interpolados) https://strapi.merillife.com/uploads/myval_1712225907pdf_41222f1e2c.pdf
Evolut	23 · 26 · 29 · 34	— · — · — · — altura no verificada: dibujo esquemático, no a escala	Medtronic Evolut: altura del stent no verificada — altura esquemática https://www.medtronic.com/en-gb/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/transcatheter-systems/evolut-pro-plus-tavi-system.html
Navitor	23 · 25 · 27 · 29 · 35	47 · 48 · 48 · 48 · 47 altura de fuente secundaria (pendiente de verificar)	Altura del stent Abbott Navitor (fuente secundaria, copia no oficial de Abbott MAT-2402101) — pendiente de verificar https://storage.mtender.gov.md/get/2693b008-8156-4337-ad2f-ce70abb444c1-1732000998730
Allegra	23 · 27 · 31	— · — · — altura no verificada: dibujo esquemático, no a escala	Allegra: altura del stent no verificada — altura esquemática https://eurointervention.pconline.com/article/the-allegra-transcatheter-heart-valve-european-multicentre-experience-with-a-no-val-self-expanding-transcatheter-aortic-valve
VitaFlow	21 · 24 · 27 · 30	50 · 50 · 53 · 53 altura del fabricante	Folleto MicroPort VitaFlow Liberty, altura de la válvula H https://microport.com/assets/documents/VitaFlow-Liberty-Brochure.PDF

6 Fuentes, licencia, derechos y créditos

Fuentes de datos

Fuente oficial

Documentos usados para las dimensiones de esta versión del catálogo (versión de datos 2026-10-06):

- [Abbott — Regent™ Aortic Mechanical Heart Valve — product page, ordering information](#) (SJM)
- [St. Jude Medical — Regent™ FlexCuff ordering information \(2013\) — valve orifice inner diameter](#) (SJM)
- [Abbott — Masters Series™ / Masters HP™ Instructions for Use, Table 1 Reference Dimensions](#) (SJM)
- [Corcym — Carbomedics™ Family brochure CC-MK-00003 A \(2021\)](#) (CarboMedics)
- [Medtronic — Open Pivot™ product pages \(Standard and AP360™, aortic and mitral\): tissue annulus and orifice inner diameter](#) (Medtronic Open Pivot™ (ATS))
- [ATS Medical — Open Pivot® IFU, Table 1: Valve Dimensions \(profile heights, inside/outside diameter, orifice area\)](#) (Medtronic Open Pivot™ (ATS))
- [ATS Medical — ATS Open Pivot® Heart Valve Product Guide OPP0012R0; Medtronic Open Pivot™ UC201101694a \(2011\)](#) (Medtronic Open Pivot™ (ATS))
- [On-X® Prosthetic Heart Valve Instructions for Use, doc. 0459 \(06/2017\)](#) (On-X®)
- [Corcym — Bicarbon™ Family brochure CC-MK-00002 A](#) (Bicarbon™)
- [Meril Life Sciences — MILTONIA™ Bi-Leaflet Mechanical Valve brochure MLT/BROCHURE/003/MLS/20231120/GLOBAL \(Ordering information; implant-height table\)](#) (Meril Miltonia™)

Datos no oficiales (literatura, distribuidores)

- [Chambers JB, Oo L, Narracott A, et al. Nominal size in six bileaflet mechanical aortic valves: a comparison of orifice size and biologic equivalence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125\(6\):1388-93 \(Table 1, measured inside diameter\)](#) (SJM)
- [Smithsonian National Museum of American History — Jyros Bileaflet Heart Valve \(object nmah_1726314\)](#) (Jyros)

Datos propios del hospital

- Tablas de tamaño TAVI: Artículo ViMech, Tabla 2: tamaño de THV para las prótesis disponibles (datos del equipo, manuscrito en preparación)
- Marcas sin fuente oficial (valores sin verificar): Edwards Duromedics, HP-Biplus, Jyros

Licencia y autoría

© 2026 ICICOR — Instituto de Ciencias del Corazón, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La estructura, los textos, las tablas, los cálculos, las traducciones, las tablas de tamaño TAVI y los esquemas originales de ViMech se publican bajo licencia [Creative Commons BY-NC-ND 4.0](#). Puede usar la app libremente y compartirla citando la autoría; no puede venderla, redistribuir copias modificadas ni presentarla como propia sin permiso por escrito. Las imágenes, nombres y marcas de terceros quedan fuera de esta licencia.

Cómo citar

ICICOR — Instituto de Ciencias del Corazón, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. ViMech: válvulas mecánicas — identificación fluoroscópica y diseño para procedimientos valve-in-valve (dimensiones y tamaño de TAVI aórtico) [aplicación web]. Versión de datos 2026-10-06. https://hcuvicicor.github.io/ViMech_app/ (consultado el 2026-10-08).

Datos

Las dimensiones son datos técnicos tomados de los documentos de los fabricantes que figuran en *Fuentes de datos*; los valores de la literatura o de distribuidores se indican como tales. Las tablas de tamaño TAVI son datos propios del equipo.

Marcas y ausencia de afiliación

Abbott, St. Jude Medical, Regent, Masters, Medtronic, ATS, Open Pivot, Corcym, CarboMedics, Bicarbon, Artivion, On-X, Meril, Miltonia, Edwards, Duromedics, SAPIEN, Evolut, Myval, ALLEGRA, Navitor, VitaFlow y cualquier otro nombre de producto o empresa son marcas o marcas registradas de sus respectivos titulares. Aparecen únicamente para identificar los dispositivos descritos. ViMech es independiente y no está afiliada, patrocinada ni avalada por ningún fabricante.

Créditos de las imágenes

Las imágenes de producto se reproducen citando su procedencia, solo para identificar los dispositivos y como ilustración clínico-educativa. Los derechos de cada imagen pertenecen al titular indicado; ViMech no se atribuye su propiedad y no están cubiertas por la licencia anterior.

Corcym S.r.l. · 35 imágenes

<https://www.corcym.com/devices/aortic>

Páginas de producto y folletos de Corcym (CarboMedics™, Bicarbon™).

- CarboMedics aórtica — Vídeo de fluoroscopia 1
- CarboMedics aórtica — Vídeo de fluoroscopia 2
- CarboMedics aórtica — Vídeo de fluoroscopia 3
- CarboMedics aórtica — Vídeo de posicionamiento TAVI
- Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Posición in situ
- Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Foto
- Sorin Bicarbon Fitline mitral — Posición in situ
- Sorin Bicarbon Fitline mitral — Foto
- Sorin Bicarbon Overline aórtica — Foto
- Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Posición in situ
- Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Foto
- CarboMedics Optiform mitral — Posición in situ
- CarboMedics Optiform mitral — Foto
- CarboMedics Orbis aórtica — Foto
- CarboMedics Orbis mitral — Foto
- CarboMedics Reduced aórtica — Posición in situ
- CarboMedics Reduced aórtica — Foto
- CarboMedics Standard aórtica — Foto
- CarboMedics Standard mitral — Posición in situ
- CarboMedics Standard mitral — Foto
- CarboMedics Top Hat aórtica — Posición in situ
- CarboMedics Top Hat aórtica — Foto
- CarboMedics Orbis aórtica — Foto de catálogo
- CarboMedics Reduced aórtica — Foto de catálogo
- CarboMedics Standard aórtica — Foto de catálogo
- CarboMedics Standard Pediátrica aórtica — Foto de catálogo
- CarboMedics Top Hat aórtica — Foto de catálogo

- CarboMedics Reduced aórtica — Posición in situ
- CarboMedics Top Hat aórtica — Foto
- CarboMedics Top Hat aórtica — Posición in situ
- Sorin Bicarbon aórtica — Foto
- Sorin Bicarbon familia — Foto
- Sorin Bicarbon Fitline aórtica — Posición in situ
- Sorin Bicarbon Fitline mitral — Posición in situ
- Sorin Bicarbon Slimline aórtica — Posición in situ

Medtronic plc / ATS Medical · 11 imágenes

<https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/cardiovascular/heart-valves/mechanical-valves-conduits/medtronic-open-pivot-mechanical-heart-valve.html>

Páginas de producto de Medtronic y documentación de ATS Medical / Open Pivot™.

- Medtronic Open Pivot AP360 — Foto
- Medtronic Open Pivot Estándar — Foto
- Medtronic Open Pivot Estándar / AP — Esquema de medidas (área del orificio y alturas)
- Medtronic Open Pivot AP360 aórtica — Foto
- Medtronic Open Pivot — Esquema (eje de pivote)
- Medtronic Open Pivot — Foto
- Medtronic Open Pivot Estándar aórtica — Foto
- Medtronic Open Pivot AP360 aórtica — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular)
- Medtronic Open Pivot AP360 mitral — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular)
- Medtronic Open Pivot Estándar aórtica — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular)
- Medtronic Open Pivot Estándar mitral — Esquema de medidas (A = DI del orificio, B = anillo tisular)

Artivion, Inc. (On-X®) · 12 imágenes

<https://www.onxlti.com>

Páginas de producto y documentación de Artivion / On-X Life Technologies.

- On-X anillo de sutura aórtico — Foto
- On-X aórtica — Foto
- On-X mitral — Foto
- On-X Anatomic aórtica — Foto
- On-X Standard aórtica — Varias tallas (foto)
- On-X Conform-X aórtica — Foto
- On-X Standard aórtica — Foto
- On-X aórtica — Foto
- On-X aórtica — Foto lateral
- On-X anillo, entrada acampanada y protectores de pivote — Foto de detalle
- On-X mitral — Foto
- On-X mitral — Esquema (características de diseño)

Meril Life Sciences Pvt. Ltd. · 4 imágenes

https://strapi.merillife.com/uploads/miltonia_1702448206pdf_32c38dec34.pdf

Folleto MILTONIA™ MLT/BROCHURE/003/MLS/20231120/GLOBAL.

- Meril Miltonia aórtica — Varias tallas (foto)
- Meril Miltonia — Foto
- Meril Miltonia — Varias tallas (foto)
- Meril Miltonia (anillo de titanio y pivotes) — Imagen 3D

Abbott (St. Jude Medical™) · 10 imágenes

<https://www.cardiovascular.abbott/us/en/hcp/products/structural-heart/surgical-valve-solutions/regent-valve.html>

Páginas de producto e información de pedido de Abbott / St. Jude Medical.

- SJM aórtica — Vídeo de posicionamiento de válvula expandible con balón
- SJM aórtica — Vídeo 1 de posicionamiento de válvula autoexpandible
- SJM aórtica — Vídeo 2 de posicionamiento de válvula autoexpandible
- SJM aórtica — Vídeo de implante de Myval
- SJM Masters manguito estándar — Foto
- SJM Masters manguito expandido — Foto
- SJM Masters HP aórtica — Foto
- SJM Masters HP aórtica y mitral — Vista de perfil
- SJM Regent FlexCuff — Foto
- SJM Regent manguito estándar — Foto

Smithsonian National Museum of American History · 13 imágenes · Dedicación al dominio público (CC0 1.0)

<https://www.si.edu/openaccess>

Colección Open Access; se indica el identificador del objeto de cada imagen.

- SJM Regent aórtica 23 mm — Foto — [NMAH-RWS2014-03743](#)
- SJM Masters HP aórtica 23 mm — Foto — [NMAH-RWS2014-03745](#)
- SJM Masters aórtica 27 mm (manguito de poliéster) — Foto — [NMAH-RWS2014-03742](#)
- SJM Masters mitral — Foto — [NMAH-RWS2014-03744](#)
- SJM Masters mitral 31 mm — Foto — [NMAH-RWS2014-03741](#)
- CarboMedics aórtica (1996) — Foto — [NMAH-AHB2015q060856-000001](#)
- CarboMedics aórtica (1996) — Foto oblicua — [NMAH-AHB2015q060858-000001](#)
- Jyros aórtica — Foto — [NMAH-AHB2015q060912-000001](#)
- Jyros aórtica — Foto, discos cerrados — [NMAH-AHB2015q060911-000001](#)
- Jyros aórtica — Foto oblicua — [NMAH-AHB2015q060909-000001](#)
- Medtronic ATS Open Pivot (1992) — Foto — [NMAH-RWS2016-09489](#)
- On-X modelo temprano (Bokros) — Foto — [NMAH-AHB2015q060852-000001](#)
- On-X modelo temprano (Bokros) — Foto oblicua — [NMAH-AHB2015q060849-000001](#)

Otras figuras

Las imágenes de fluoroscopia, las figuras comparativas y los esquemas no incluidos arriba se reproducen con fines de identificación educativa. Los derechos siguen perteneciendo a sus respectivos titulares o autores.

Titulares de derechos

Si es titular de derechos de algún material mostrado aquí y desea que se cite de otro modo o que se retire, escriba a la dirección de contacto de la app y se atenderá con prontitud. hcuvicicor@gmail.com

Acerca de ViMech

ViMech es una guía de consulta rápida sobre la identificación fluoroscópica y el diseño de las válvulas cardíacas mecánicas, pensada como referencia para procedimientos valve-in-mechanical (TAVI en prótesis mecánica).

Cada modelo indica el documento del que proceden sus dimensiones. Los modelos marcados como *sin verificar* usan datos propios del hospital porque todavía no se ha localizado una fuente oficial.

Aviso de copyright: todos los nombres de producto, marcas, logotipos e imágenes pertenecen a sus respectivos propietarios (Abbott, Medtronic, Corcym, Artivion, Meril, etc.). Se usan con fines educativos, de identificación y de referencia clínica.

Contacto

Preguntas, correcciones o datos nuevos: hcuvicicor@gmail.com

Si detecta un valor que no coincide con las IFU del fabricante, envíe la referencia del documento.